


Intelli Wrap Cuff

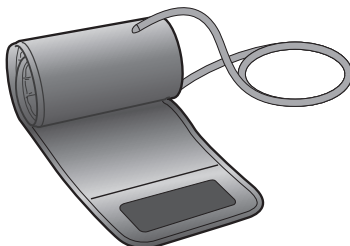


HEM-FL31 هيم- اف ال 31

OMRON Blood Pressure Monitor Cuff

الشريط الضاغط لجهاز اومرون لقياس ضغط الدم

• <i>Instructions for use</i>	2	EN
• <i>Mode d'emploi</i>	6	FR
• <i>Gebrauchsanweisung</i>	10	DE
• <i>Istruzioni per l'uso</i>	14	IT
• <i>Instrucciones de uso</i>	18	ES
• <i>Gebruiksaanwijzing</i>	22	NL
• <i>Руководство по эксплуатации</i>	26	RU
• <i>Kullanım talimatları</i>	34	TR
• <i>إرشادات الاستخدام</i>	٢	AR

Issue Date:/ Date de publication:/ Ausgabedatum:
 Data di pubblicazione:/ Fecha de publicación:/ Uitgiftedatum: 2022-12-14
 Дата выпуска:/ Verilme Tarihi:/ تاريخ الإصدار:

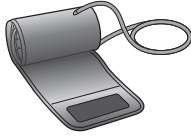

OMRON kolluk HEM-FL31'i satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kolluğun kol çevresi 22 ile 42 cm arasındadır. Lütfen Kan Basıncı Ölçüm Cihazının orijinal talimat kılavuzuna başvurun.



Güvenliğiniz için lütfen bu kullanım kılavuzuna dikkatle uyun.

Lütfen, daha sonra başvurabilmek için saklayın. Kan basıncınız hakkında özel bilgi almak için **DOKTORUNUZA BAŞVURUN.**

⚠ Dikkat: Önlenmediğinde, kullanıcı ya da hastanın düşük ya da orta seviye-
de yaralanmasına veya ünitenin ya da diğer cihazların zarar görmesine neden olabilecek potansiyel bir tehlike durumunu belirtir.

- Bu OMRON manşet çeşitli OMRON tansiyon aletlerine uyumludur ve birlikte kullanılabilir. Bu manşet, hava girişinin yanındaki manşet çıkartmasında belirtildiği gibi, sadece HEM-FL31 ile uyumlu OMRON tansiyon ölçüm cihazlarıyla çalışır.
- Kullanmanız gereken tıpayla ilgili olarak ürününüzü kontrol ediniz. Yanlış tapanın kullanılması hava sızıntısına ve yanlış okumalara neden olabilir.
- Kolluğu yıkamayın ya da ıslatmayın.

Kullanım talimatları

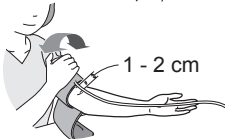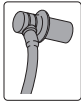

Dar giysilerinizi veya sol kolunu kıvrıdığınız ve sol kolunuzun üst kısmını sıkı giysilerinizi çıkarın. Kolluğu kalın giysilerin üzerine takmayın.

1. Hava tapasını hava jakına sıkı şekilde takın.

Not: Soldaki resimde gösterildiği gibi hava tıpasını kullanıyorsanız, tıklayarak hava giriş yerine oturduğundan emin olun.

2. Kolluğu, sol üst kol kısmına takın.

Kolluğun alt kenarının dirsekten 1 ila 2 cm uzakta olması gerekir. Kolluk, hava borusu elinize doğru bakacak şekilde yerleştirilmelidir.



3. Kumaş bağlantı parçası ile sıkıca kapatılmış.

Sağ koldan ölçüm yapma

Hava borusu dirseğinizin yanında bulunur. Kolunuzu hava borusuna yaslamamaya dikkat edin.

Not: Kan basıncı sağ kol ile sol kolda farklı olabilir; bu nedenle ölçülen kan basıncı değerleri de farklı olabilir. OMRON, ölçümü daima aynı kolunuzdan yapmanızı tavsiye etmektedir. İki kol arasındaki değerler çok farklılık gösterirse, ölçümünüz için hangi kolun kullanılacağını lütfen doktorunuza danışın.

- Kolluğu temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez veya yumuşak ve nötr sabun ile nemlendirilmiş bir bez kullanın.
- Kolluğu temizlemek için benzin, tiner ya da benzeri çözücüler kullanmayın.
- Kolluğu aşırı sıcaklığa, neme, doğrudan güneş ışığına, toza ya da çürütücü buharlara maruz kalabileceği yerlerde saklamayın.
- Hava borusunu fazla kıvrımayın ya da katlamayın.

Bakım












Bu cihazla ilgili olarak meydana gelen ciddi olayları lütfen üreticiye ve yerleşik olduğunuz Üye Devletin yetkili makamına rapor edin.












Bu OMRON ürünü, OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., JAPONYA'nın sıkı kalite sistemi ile üretilmiştir.


Özellikler:

Ürün tanımı	OMRON Kan Basıncı Ölçüm Cihazı Koluğu
Model	HEM-FL31
Kol çevresi	22 ila 42 cm
Kolluk boyutları	En fazla 585 x 160 mm (katlanmamış)
Kolluk basınç aralığı	Basınç: 0 - 299 mmHg
Doğruluk	Basınç: ± 3 mmHg
Sınıflandırma	Sınıf I
Çalışma koşulları	+10 - +40°C (50 - 104°F) %15 ila 90 BN (yoğunlaşmayan) 700 ila 1060 hPa
Saklama / Nakliye koşulları	-20 - +60°C (-4 - 140°F) %10 ila 95 BN (yoğunlaşmayan) 700 ila 1060 hPa
Ağırlık	En fazla 179 g
Paketin içindekiler	Kolluk, kullanım kılavuzu, hava tapaları
Dayanıklılık süresi (Kullanım ömrü), Garanti	1 yıl

Simgelerin tanımları

	CE İşareti
	UKCA İşareti
	Parti numarası
	Benzersiz cihaz tanımlayıcısı
	Tıbbi cihaz
	Sıcaklık sınırlaması
	Nem sınırlaması
	Atmosferik basınç sınırlaması
	Cihaz ile uyumlu kollukların tanıtım işareti

	Sol kol için kolluk konumlandırma göstergesi
INDEX 	Aralık işaretçisi ve kol arteri hizalama konumu
ART. 	Arter işareti
LATEX FREE	Doğal kauçuk lateksten üretilmemiştir
	Doğru kolluk ölçüsünü bulmaya yardımcı olan kol çevresi aralık göstergesi
REF	Referans katalog numarası
	Easy Cuff
	Intelli Wrap Cuff
	Comfort Cuff
 TECHNOLOGY BY OMRON HEALTHCARE IN JAPAN	OMRON Healthcare Teknolojisi, Japonya
	Üretim tarihi
	Kullanıcı, kullanım kılavuzuna başvurmalıdır
	Kol çevresi
Üretim tarihi, ürün ve/veya satış ambalajında bulunan parti numarasına eklenmiştir: İlk 4 hane üretim yılını, sonraki 2 hane hangi ayda üretildiğini, son 2 hane ise üretildiği günün tarihini belirtir.	

<p>Manufacturer Fabricant Hersteller Produttore Fabricante Fabrikant Производитель Üretici الشركة المصنعة</p> 	<p>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN شركة امرون هيلث كير المحدودة 53, كونوتسوبو, ترادو-شو موكو، كايوتو اليابان 617-0002</p>			
<p>EU-representative Mandataire dans l'UE EU-Repräsentant Rappresentante per l'UE Representante en la UE Vertegenwoordiging in de EU Представитель в ЕС AB temsilcisi جهة التمثيل بالاتحاد الأوروبي</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">EC</td> <td style="padding: 2px 5px;">REP</td> </tr> </table> </div>	EC	REP	<p>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS www.omron-healthcare.com</p>	
EC	REP			
<p>Importer in EU Importateur dans l'UE Importeur in der EU Importatore per l'UE Importador en la UE Importeur in de EU Импортер в ЕС AB'de İthalatçı المستورد في الاتحاد الأوروبي</p>				
<p>Production facility Site de production Produktionsstätte Stabilimento di produzione Planta de producción Productiefaciliteit Производственное подразделение Üretim Tesisleri منشأة لتصنيع</p>	<p>OMRON DALIAN Co., Ltd. No.3 Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600 Liaoning, P.R. China</p>			
<p>Subsidiaries Succursales Niederlassungen Consociate Empresas filiales Dochterondernemingen Филиалы Yan Kuruluşlar الشركات التابعة</p>	<p>Importer in the United Kingdom and UK responsible person</p>	<p>OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors</p> <p>OMRON MEDI ZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH / OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors</p>		

Made in China
Fabriqué en Chine
Hergestellt in China

Prodotto in Cina
Fabricado en China
Geproduceerd in China

Сделано в Китае
Çin'de Üretilmiştir
صنع في الصين