


## Intelli Wrap mansett

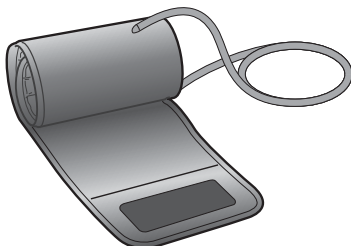

### HEM-FL31

## OMRONI vererõhuaparaadi mansett

• *Kasutusjuhend*

2 ET

Väljaandmiskuupäev: 2022-12-14





Täname, et ostsite OMRONI manseti HEM-FL31. See mansett on mõeldud kasutamiseks õlavarrel ümbermõõduga 22 kuni 42 cm. Palun vaadake vererõhuaparaadiga kaasasolnud kasutusjuhendit.

Järgige seda kasutusjuhendit ohutuse tagamiseks hoolikalt. Hoidke kasutusjuhend alles, et seda vajaduse korral uuesti lugeda. Kui soovite täpsemat teavet oma vererõhu kohta, PIDAGE NÕU ARSTIGA.

**⚠ Ettevaatust!** Näitab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mis võib kasutajale või patsiendile põhjustada kergeid või keskmise raskusega vigastusi või kahjustada aparati või muid ümbritsevaid esemeid, kui olukorda ei väldita.

- Omroni õlavarremansetti on võimalik ühendada erinevate OMRONI vererõhuaparaatidega. Mansett töötab ainult OMRONI vererõhuaparaatidega, mis ühilduvad HEM-FL31-ga, nagu on märgitud õhuvooliku pesa kõrval oleval mansetikleebisel.
- Kontrollige, millist pistikut te oma tootega kasutama peate. Vale pistiku kasutamine võib põhjustada õhulekkeid ja valesid näitused.
- Ärge peske mansetti ega tehke seda märjaks.

## Kasutusjuhend

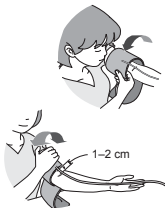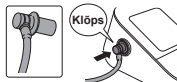

Eemaldage vasakult õlavarrelt liibuvad riided või tihedalt üles kääritud käis.

Ärge asetage õlavarremansetti paksudele riietele.

1. Sisestage õhuvooliku pistik korralikult õhuvooliku pesa.

Märkus: kasutades õhuvooliku pistikut nagu on näidatud vasakpoolsel pildil, veenduge, et sisestate selle nii sügavale, kuni kuulete klõpsu.

2. Pange õlavarremansett vasakule õlavarrele.

Õlavarremanseti alumine serv peab jääma küünarnukist 1 kuni 2 cm kõrgemale. Mansett peab olema õlavarrele paigutatud selliselt, et õhuvoolik on suunatud käe poole.



3. Sulgege mansett riidest kinniti abil tihkelt ümber õlavarre.

#### **Vererõhu mõõtmine paremal õlavarrel**

Õhuvoolik jääb teie küünarnuki kõrvale.

Ärge toetage kätt õhuvoolikule.

Märkus. Vererõhk võib olla paremal ja vasakul õlavarrel erinev. Seetõttu võivad erineda ka mõõdetud vererõhu väärtused. OMRON soovib vererõhku mõõta alati samalt käelt. Kui kummalgi õlavarrel mõõdetud väärtused erinevad märkimisväärselt, pidage nõu arstiga, et selgitada välja, kumba õlavart peaksite mõõtmiseks kasutama.

- Kasutage õlavarremanseti puhastamiseks pehmet ja kuiva riidelappi või pehmet ja niisutatud riidelappi ning neutraalset seepi.
- Ärge kasutage õlavarremanseti puhastamiseks bensiini ega sarnaseid lahusteid sisaldavaid vedelaid.
- Ärge hoidke õlavarremansetti kohtades, mis puutuvad kokku äärmuslike temperatuuride, niiskuse, otsese päikesevalguse, tolmu või söövitavate aurudega.
- Ärge painutage ega väänake õhuvoolikut liiga palju.

## **Hooldus**












Kõigist selle seadmega seotud rasketest vahejuhtumitest teatage tootjale ja asukohaliikmesriigi pädevale asutusele.













See OMRONi toode on toodetud OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. (JAAPAN) range kvaliteedisüsteemi alusel.

## Tehnilised andmed

Toote kirjeldus	OMRONI vererõhuaparaadi mansett
Mudel	HEM-FL31
Õlavarre ümbermõõt	22–42 cm
Manseti mõõtmed	Mitte suurem kui 585 × 160 mm (kokku voltimata)
Manseti rõhuvahemik	Rõhk: 0–299 mmHg
Täpsus	Rõhk: ±3 mmHg
Klassifikatsioon	Klass I
Kasutustingimused	+10 kuni 40 °C Suhteline õhuniiskus 15–90% (mittekondenseeruv) 700–1060 hPa
Säilitamis-/ transporditingimused	-20 kuni +60 °C Suhteline õhuniiskus 10–95% (mittekondenseeruv) 700–1060 hPa
Kaal	Mitte üle 179 g
Pakendi sisu	Mansett, kasutusjuhend, õhupistikud
Kasutusiga, garantii	1 aasta

### Sümbolite kirjeldus

	CE-märgistus
	UKCA märgistus
	Partiinumber
	Seadme kordumatu identifitseerimistunnus
	Meditsiiniseade
	Temperatuuripiirang
	Õhuniiskuse piirang
	Atmosfäärirõhu piirang
	Seadmega ühilduvate mansettide identifikaator

	Manseti asetusemärgis vasakule käele
	Suuruse märgistus ja asetuse määratlemine õlavarrearteri suhtes
	Arteri märk
<b>LATEX FREE</b>	Tootmisel ei ole kasutatud looduslikku kummilateksit
	Õlavarre ümbermõõdu suurusindikaator, mis aitab valida õige suurusega mansetti
	Kataloogi viitenumber
	Easy mansett
	Intelli Wrap mansett
	Comfort-mansett
 TECHNOLOGY BY OMRON HEALTHCARE IN JAPAN	OMRON Healthcare'i tehnoloogia, Jaapan
	Tootmiskuupäev
	Kasutaja peab vaatama kasutusjuhendit
	Õlavarre ümbermõõt
Toote tootmiskuupäev on seerianumbri sees, mis asub tootel ja/või müügipakendil: esimesed 4 märki tähendavad tootmise aastat, järgmised 2 märki tähendavad tootmise kuud ja järgmised 2 märki tähendavad tootmise kuupäeva.	

<b>Tootja</b> 	<b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b> 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAAPAN	
<b>Esindaja Euroopa Liidus</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;"> <b>EC</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px; margin-top: 5px;"> <b>REP</b> </div>	<b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b> Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLAND <a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a>	
<b>Importija ELis</b>		
<b>Tootmisettevõtte</b>	<b>OMRON DALIAN Co., Ltd.</b> No.3 Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600 Liaoning, Hiina RV	
<b>Tütaretevõtjad</b>	Importija Ühendkuningriigis ja vastutav isik Ühendkuningriigis	<b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b> Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK <a href="http://www.omron-healthcare.com/distributors">www.omron-healthcare.com/distributors</a>
	<b>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH /  OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b> <a href="http://www.omron-healthcare.com/distributors">www.omron-healthcare.com/distributors</a>	

Valmistatud Hiinas