


„Intelli Wrap” aprobe

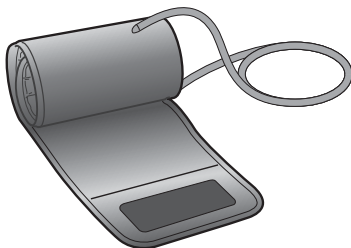


HEM-FL31

OMRON asinsspiediena mēritāja aprobe

• *Lietošanas instrukcija*

2 LV

Izdošanas datums: 2022-12-14

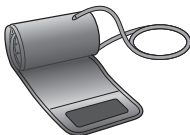


Pateicamies, ka iegādājāties OMRON aproci HEM-FL31. Rokas apkārtmērs šai aprocei ir 22–42 cm. Skatiet sava asinsspiediena mērītāja oriģinālās lietošanas instrukcijas.

Jūsu drošībai, lūdzu, ievērojiet visus lietošanas instrukcijas norādījumus. Lūdzu, saglabāiet to turpmākām uzziņām. Lai uzzinātu specifisku informāciju par savu asinsspiedienu, JAUTĀJIET ĀRSTAM.

⚠ Uzmanību! Norāda iespējamu apdraudējumu, kas nenovērsts var izraisīt lielāku vai mazāku kaitējumu ierīces lietotājam vai pacientam, vai arī sabojāt ierīci vai citus priekšmetus.

- OMRON aproce ir savienojama ar dažādiem OMRON asinsspiediena mērītājiem. Šī aproce darbojas tikai ar OMRON asinsspiediena mērītājiem, kas ir saderīgi ar HEM-FL31, kā norādīts aproces uzlīmē blakus gaisa ligzdai.
- Pārbaudiet izstrādājumu, lai noteiktu, kurš uzgalis jāizmanto. Nepareizā uzgaļa izmantošana var izraisīt gaisa noplūdi un neprecīzus rādījumus.
- Aproci nedrīkst mazgāt vai saslapināt.

Lietošanas instrukcija

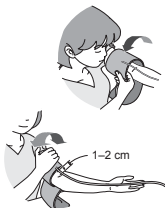

Atbrīvojiet kreisās rokas augšdelmu no cieši pieguloša apģērba vai cieši uzlocītām piedurknēm. Nelieciet aproci uz bieza apģērba.

1. Gaisa caurulītes uzgali cieši iespraudiet piepūšamās aproces kontaktligzdā.

Piezīme. Ja izmantojat gaisa aizbāzni, kā parādīts attēlā kreisajā pusē, noteikti ievietojiet to gaisa ligzdā, līdz atskan klikšķis.

2. Aproci uzlieciet uz kreisās rokas augšdelma.

Aproces apakšmalai jāatrodas 1–2 cm virs elkoņa. Uzlieciet aproci uz augšdelma ar gaisa caurulīti vērstu jūsu plaukstu virzienā.



3. Stingri aiztaisiet auduma aizdari.

Mērīšana uz labās rokas

Gaisa caurulītei jāatrodas elkoņa sānos.

Uzmanieties, lai neuzliktu roku uz gaisa caurulītes.

Piezīme: asinsspiediens labajā un kreisajā rokā var būt atšķirīgs, tādēļ arī izmērītā asinsspiediena vērtības var atšķirties. „OMRON” iesaka mērīšanai vienmēr izmantot vienu un to pašu roku. Ja mērījumu rezultāts abām rokām būtiski atšķiras, konsultējieties ar ārstu, uz kuras rokas veikt mērījumus.

- Tīrīšanai izmantojiet mīkstu un sausu drāniņu vai mīkstu un samitrinātu drāniņu un ziepes ar neitrālu pH līmeni.
- Netīriet aproci ar benzīnu, atšķaidītājiem vai līdzīgiem šķīdinātājiem.
- Neuzglabājiet aproci vietās, kur ir pārāk augsta vai pārāk zema temperatūra, pārāk augsts mitruma līmenis, tieši saules stari, putekļi vai koroziju veicinoši tvaiki. Nelieciet aproci uzglabāšanai ja uzglabāšanas vieta pakļauta galējai temperatūrai, mitrumam, tiešiem saules stariem, putekļiem vai koroziju izraisošiem tvaikiem.
- Nesalokiet vai nevērpjiet gaisa caurulīti pārāk cieši.

Apkope
















Lūdzu, ziņojiet ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā esat reģistrēts, par jebkādu nopietnu incidentu, kas noticis saistībā ar šo ierīci.

Šis OMRON izstrādājums ražots, ievērojot OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., JAPĀNĀ, stingru kvalitātes kontroles sistēmu.

Specifikācijas:

Izstrādājuma apraksts	OMRON asinsspiediena mērītāja aproce
Modelis	HEM-FL31
Rokas apkārtmērs	22–42 cm
Aproces izmēri	Ne lielāka par 585 x 160 mm (atlocīta)
Aproces spiediena diapazons	Spiediens: 0–299 mmHg
Precizitāte	Spiediens: ± 3 mmHg
Klasifikācija	I kategorija
Darbības apstākļi	no +10 °C līdz +40 °C (no 50 °F līdz 104 °F) no 15 līdz 90 % RH (bez kondensēšanās) no 700 līdz 1060 hPa
Uzglabāšanas/ transportēšanas apstākļi	no -20 °C līdz +60 °C (no -4 °F līdz 140 °F) no 10 līdz 95 % RH (bez kondensēšanās) no 700 līdz 1060 hPa
Svars	Ne vairāk kā 179 g
Komplekta saturs	Aproce, lietošanas instrukcija, gaisa caurulītes uzgaļi
Derīguma termiņš (darbmūžs), garantija	1 gads

Simbolu apraksts	
	CE marķējums
	UKCA marķējums
	Partijas numurs
	Ierīces unikālais identifikators
	Medicīniska ierīce
	Temperatūras ierobežojums
	Mitruma ierobežojums
	Atmosfēras spiediena ierobežojums
	Identifikators aproces saderībai ar ierīci

	Aproces novietojuma indikators kreisajai rokai
	Diapazona un brahiālās artērijas novietojuma indikators
	Artērijas novietojuma atzīme
LATEX FREE	Nesatur dabīgo kaučuka lateksu
	Rokas apkārtmēra diapazona indikators, kas palīdz izvēlēties pareizā izmēra aproci
	Kataloga atsaucēs numurs
	„Easy” aproce
	„Intelli Wrap” aproce
	„Comfort” aproce
	OMRON Healthcare tehnoloģija, Japāna
	Ražošanas datums
	Lietotājam informācija jāmeklē lietošanas instrukcijā
	Rokas apkārtmērs
Ierīces ražošanas datums ir iekļauts partijas numurā, kurš ir norādīts uz ierīces un/vai tirdzniecības iepakojuma. Pirmie četri cipari apzīmē ražošanas gadu, nākamie divi — ražošanas mēnesi un pēdējie divi – ražošanas dienu.	

Ražotājs 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPĀNA			
Pārstāvis Eiropas Savienībā <table border="1" data-bbox="63 227 179 263"> <tr> <td>EC</td> <td>REP</td> </tr> </table>	EC	REP	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NĪDERLANDE www.omron-healthcare.com	
EC	REP			
Importētājs ES				
Ražotne	OMRON DALIAN Co., Ltd. No.3 Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600 Liaoning, Ķīnas Tautas Republika			
Filiāles	Importētājs un atbildīgā persona Lielbritānijā	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, APVIENOTĀ KARALISTE www.omron-healthcare.com/distributors		
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH / OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors			

Ražots Ķīnā