


Intelli Wrap manžetna

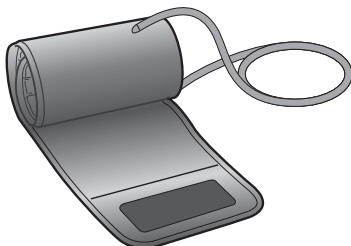

## HEM-FL31

OMRON manžetna aparata za  
merenje krvnog pritiska

---

• *Uputstvo za upotrebu*

2

SR

Datum izdavanja: 2022-12-14



Hvala što ste kupili manžetnu OMRON HEM-FL31. Obim ruke za ovu manžetnu je od 22 do 42 cm. Pogledajte originalni priručnik sa uputstvima za vaš aparat za merenje krvnog pritiska.

**Pridržavajte se ovog uputstva za upotrebu radi svoje bezbednosti. Sačuvajte ga kao podsetnik u budućnosti. Za konkretne informacije o svom krvnom pritisku OBRATITE SE LEKARU.**


**⚠ Pažnja:** Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ako se ne izbegne, može da dovede do manje ili umerene povrede korisnika ili pacijenta ili do oštećenja opreme ili ostale imovine.

- Ova manžetna za ruku kompanije OMRON može da se poveže na razne aparate za merenje krvnog pritiska kompanije OMRON. Ova manžetna radi samo sa aparatima za merenje krvnog pritiska kompanije OMRON koji su kompatibilni sa HEM-FL31, kao što je navedeno na nalepnici manžetne pored priključka creva za vazduh.
- Na svom proizvodu proverite koju vrstu utikača treba da koristite. Ako koristite pogrešan utikač, to može da dovede do propuštanja vazduha i netačnih očitavanja.
- Manžetnu nemojte prati niti kvasiti.

## Uputstvo za upotrebu

Uklonite tesnu odeću ili tesno savijeni rukav s leve nadlaktice.

Nemojte postavljati manžetnu za ruku preko debele odeće.

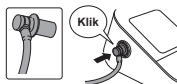

1. Čvrsto priključite utikač creva za vazduh u priključak creva za vazduh.

**Napomena:** Ako koristite priključak creva za vazduh kao što je prikazano na slici sa leve strane, obavezno ga umetnite u priključak creva za vazduh sve dok ne klikne.

2. Postavite manžetnu za ruku na levu nadlakticu.

Donja strana manžetne za ruku treba da bude na 1 do 2 cm iznad lakta. Manžetnu treba postaviti na nadlakticu tako da je cevčica za vazduh usmerena ka šaci.





### 3. Pričvrstite pomoću kopče od tkanine.

#### **Merenje na desnoj ruci**

Cevčica za vazduh će se nalaziti sa bočne strane vašeg lakta.

Pazite da ruku ne spustite na cevčicu za vazduh.

Napomena: Krvni pritisak može da se razlikuje na desnoj i levoj ruci, zbog čega i izmerene vrednosti krvnog pritiska mogu da budu različite. OMRON preporučuje da za merenje uvek koristite istu ruku. Ako se vrednosti između dve ruke znatno razlikuju, raspitajte se kod svog lekara na kojoj ruci bi trebalo da obavljate merenje.

- Koristite meku, suhu krpu ili meku, navlaženu krpu i neutralni sapun za čišćenje manžetne za ruku.
- Za čišćenje manžetne za ruku nemojte koristiti benzin, razređivač ili slične rastvarače.
- Nemojte skladištiti manžetnu za ruku u uslovima ekstremnih temperatura i vlažnosti, izloženu direktnoj sunčevoj svetlosti, prašini ili korozivnim parama.
- Nemojte prekomerno uvijati ili previjati crevo za vazduh.

## Održavanje
























Prijavite proizvođaču i nadležnim organima države članice u kojoj se nalazite sve ozbiljne incidente do kojih je došlo u vezi sa ovim aparatom.

Ovaj proizvod kompanije OMRON proizveden je u skladu sa strogim sistemom kvaliteta kompanije OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., JAPAN.

## Specifikacije:

Opis proizvoda	OMRON manžetna aparata za merenje krvnog pritiska
Model	HEM-FL31
Obim ruke	22 do 42 cm
Dimenzije manžetne	Ne veća od 585 x 160 mm (razvijena)
Opseg pritiska manžetne	Pritisak: od 0 do 299 mmHg
Tačnost	Pritisak: $\pm 3$ mmHg
Klasifikacija	Klasa I
Uslovi za upotrebu	Od +10 do +40°C (od 50 do 104°F) Od 15 do 90% relativne vlažnosti vazduha (bez kondenzacije) Od 700 do 1060 hPa
Uslovi skladištenja/ transporta	Od -20 do +60°C (od -4 do 140°F) Od 10 do 95% relativne vlažnosti vazduha (bez kondenzacije) Od 700 do 1060 hPa
Težina	Ne više od 179 g
Sadržaj pakovanja	Manžetna, priručnik sa uputstvima, utikači creva za vazduh
Period trajanja (upotrební vek), garancija	1 godina

Opis simbola	
	CE oznaka
	UKCA oznaka
	Broj lota
	Jedinstveni identifikator uređaja
	Medicinsko sredstvo
	Ograničenje temperature
	Ograničenje vlažnosti vazduha
	Ograničenje atmosferskog pritiska
	Identifikator manžetni koje su kompatibilne sa aparatom

	Indikator položaja manžetne za levu ruku
	Pokazivač opsega i položaja usklađenosti sa brahijalnom arterijom
	Oznaka arterije
<b>LATEX FREE</b>	Nije napravljeno od lateksa od prirodne gume
	Indikator obima ruke kao pomoć pri odabiru odgovarajuće veličine manžetne
	Referentni kataloški broj
	Manžetna laka za upotrebu
	Intelli Wrap manžetna
	Comfort manžetna
	Tehnologiju pravi OMRON Healthcare iz Japana
	Datum proizvodnje
	Korisnik treba da pogleda uputstvo za upotrebu
	Obim ruke

Datum proizvodnje proizvoda integrisan je u broj lota koji se nalazi na proizvodu i/ili na pakovanju: prve 4 cifre označavaju godinu proizvodnje, sledeće 2 cifre mesec proizvodnje, a poslednje 2 cifre označavaju dan proizvodnje.

<b>Proizvođač</b> 	<b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b> 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN	
<b>Predstavnik u EU</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;"> <b>EC</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;"> <b>REP</b> </div>	<b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b> Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLANDIJA <a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a>	
<b>Uvoznik za EU</b>		
<b>Proizvodni pogon</b>	<b>OMRON DALIAN Co., Ltd.</b> No.3 Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600 Liaoning, NR Kina	
<b>Podružnice</b>	Uvoznik u Ujedinjenom Kraljevstvu i odgovorna osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu	<b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b> Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK <a href="http://www.omron-healthcare.com/distributors">www.omron-healthcare.com/distributors</a>
	<b>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH /</b> <b>OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b> <a href="http://www.omron-healthcare.com/distributors">www.omron-healthcare.com/distributors</a>	

Proizvedeno u Kini