


Easy Cuff

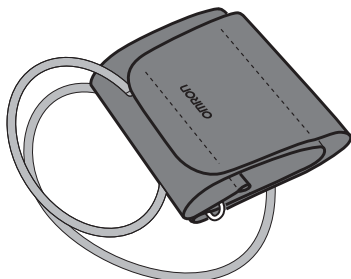

HEM-RML31

Mandzsetta OMRON vérnyomásmérőhöz


• *Használati útmutató*

2 HU

Kiállítás dátuma: 2022-12-14

OMRON

HEM-RML31

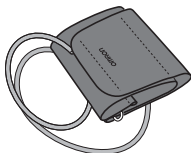

Köszönjük, hogy az OMRON HEM-RML31 mandzsettát vásárolta meg. Ez a mandzsetta 22 és 42 cm közötti karkerülethez készült. Kérjük, nézze át a vérnyomásmérőhöz kapott eredeti használati útmutatót.

A biztonságos üzemeltetés érdekében kérjük, mindig kövesse a használati útmutató irányításait.

Kérjük, tartsa meg későbbi tájékozódás céljából. A vérnyomásával kapcsolatos információkért konzultáljon orvosával.


⚠ Vigyázat! Olyan potenciális veszélyhelyzetet jelez, amely bekövetkezése a felhasználó enyhe vagy közepes mértékű sérülését, illetve a készülék és egyéb tulajdon fizikai károsodását okozhatja.

- Ez az OMRON mandzsetta számos OMRON vérnyomásmérőhöz csatlakoztatható. Ez a mandzsetta csak olyan OMRON vérnyomásmérőkkel használható, amelyek kompatibilisek a HEM-RML31 mandzsettával, ahogy az a mandzsettán, a levegőcső aljzata mellett látható címkén is fel van tüntetve.
- A használható csatlakozóval kapcsolatban ellenőrizze az aktuális terméket. Ha nem a megfelelő csatlakozót használja, akkor a levegő kiszivároghat és pontatlanok lehetnek a mérési eredmények.
- A mandzsettát ne mossa el, és ne nedvesítse meg.

Használati útmutató

Távolítsa el bal felkarjáról a szoros ruházatot vagy a szorosan feltúrt ing ujját.

Ne helyezze a mandzsettát vastag ruházatra.

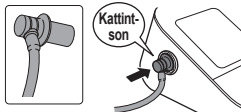


1. Dugja be a levegőcsatlakozót a levegőcső aljzatba.


Megjegyzés: Ha a bal oldali képen bemutatott módon használja a levegőcsatlakozót, ügyeljen arra, hogy kattanásig nyomja bele a levegőcső aljzatba.



2. Tekerje fel a mandzsettát jó szorosan a bal felkarja köré.

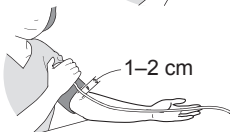

A mandzsetta alsó szélének körülbelül 1 - 2 cm-rel a könyök felett kell lennie. A levegőcső a kar belső részén legyen, a középső ujj vonalában.

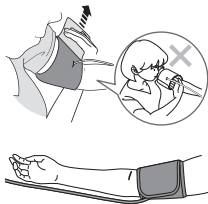

3. Szorosan zárja össze a textil kapcsot.

Vérnyomásmérés a jobb karon

A levegőcső a könyöke mellett lesz.

Ekkor vigyázzon, hogy ne tegye a levegőcsőre a kezét.

Megjegyzés: A vérnyomás különböző lehet a jobb és a bal karon mérve, így a kapott értékek is különbözhetnek. Az OMRON azt javasolja, hogy mindig ugyanazon a karján végezze el a méréseket. Ha a két karon mért értékek nagyon eltérőek, keresse fel orvosát annak meghatározásához, hogy melyik karját használja a méréshez.

- A mandzsettát egy puha, száraz ruhával, vagy egy puha, benedvesített ruhával és semleges szappannal tisztítsa meg.
- Ne használjon benzint, hígítót vagy más hasonló oldószereket a mandzsetta tisztításához.
- Ne tárolja a mandzsettát magas hőmérsékletnek, páratartalomnak, közvetlen napsütésnek, pornak vagy korrozív gőzöknek kitett helyen.
- Ne hajlítsa meg túlzottan a levegőcsövet.

Karbantartás

Specifikációk:

Termékleírás	Mandzsetta OMRON vérnyomásmérőhöz
Modell	HEM-RML31
Karkerület	22–42 cm
A mandzsetta mérete	Nem nagyobb, mint 653 x 160 mm (kihajtva)
Mandzsettanyomás tartománya	Nyomás: 0–299 Hgmm
Pontosság	Nyomás: ± 3 Hgmm
Besorolás	Class I

Működési körülmények	+10 és +40°C között (50–104°F) 15–90% relatív páratartalom (páraleszapódás nélkül) 700–1060 hPa
Tárolási/ Szállítási feltételek	-20 és +60°C között (-4–140°F) 10–95% relatív páratartalom (páraleszapódás nélkül) 700–1060 hPa
Súly	Nem több, mint 187 g
A csomag tartalma	Mandzsetta, használati útmutató, levegőcsatlakozók
Tartósság (élettartam), Garancia	1 év













Kérjük, tájékoztassa a gyártót és a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát minden, a készülékkel kapcsolatban bekövetkezett súlyos eseményről vagy problémáról.

Ez az OMRON termék a japán OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. szigorú minőségbiztosítási rendszerének megfelelően készült.

Szimbólumok leírása

	CE jelölés
	UKCA jelölés
	Gyártási szám
	Egyedi eszközazonosító
	Orvostechikai eszköz
	Hőmérsékletre vonatkozó korlát
	Páratartalomra vonatkozó korlát
	Légnyomásra vonatkozó korlát
	A készülékkel kompatibilis mandzsetták azonosítója
	Mandzsettapozicionáló jelzés a bal karhoz
	Méretsáv kijelzés és a felkarverőér igazítási pozíciója

	Jelzés a mandzsettán az artéria feletti pozicionáláshoz
LATEX FREE	Latexmentes
	Karkörület méretsávjának kijelzése a megfelelő méretű mandzsetta kiválasztásához
	Rendelési szám
	Easy Cuff
	Intelligens mandzsetta technológia
	Kényelmes mandzsetta
 <small>TECHNOLOGY BY OMRON HEALTHCARE IN JAPAN</small>	OMRON Healthcare technológia, Japán
	A gyártás időpontja
	A felhasználónak a használati útmutató leírásait kell követnie
	Karkörület
<p>A termék gyártási dátumát tartalmazza a gyártási szám, amely a terméken és/vagy a csomagoláson található: az első 4 számjegy jelenti a gyártás évét, a következő 2 számjegy a gyártás hónapját, az utolsó 2 számjegy pedig a gyártás napját.</p>	

<p>Gyártó</p> 	<p>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPÁN</p>			
<p>EU-képviselőt</p> <table border="1" data-bbox="63 205 177 238"> <tr> <td>EC</td> <td>REP</td> </tr> </table>	EC	REP	<p>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLANDIA www.omron-healthcare.com</p>	
EC	REP			
<p>EU importőr</p>				
<p>Termékképviselőt</p>	<p>OMRON DALIAN Co., Ltd. No.3 Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600 Liaoning, Kínai Népköztársaság</p>			
<p>Leányvállalatok</p>	<p>Egyesült királysági importőr és UK felelős személy</p>	<p>OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors</p>		
	<p>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH / OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors</p>			

Származási ország: Kína