


OMRON



Srednja manžeta CM2 (HEM-CR24-E)

Manžeta za tlakomjer tvrtke OMRON

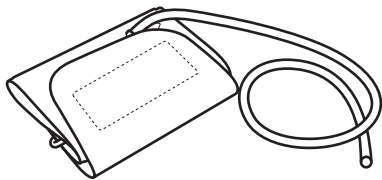

Upute za upotrebu

HR

Prije uporabe temeljito slijedite ovaj priručnik s uputama i važeći priručnik za tlakomjer OMRON. Sačuvajte ih za buduće potrebe. Točne podatke o svom krvnom tlaku ZATRAŽITE OD SVOG LIJEČNIKA.

Namjena

Namjena

Ova manžeta namijenjena je za uporabu uz tlakomjer OMRON koji mjeri krvni tlak i puls u populaciji odraslih pacijenata.

Pacijenti kojima je namijenjen

Populacija odraslih pacijenata

Predviđeni korisnici

Populacija odraslih (može obuhvaćati same pacijente) koja može razumjeti ovaj priručnik s uputama.

Klinička korist

Pacijentov krvni tlak može se izmjeriti neinvazivno i jednostavno u kućnom okruženju pomoću manžete i važećeg tlakomjera OMRON.

Vrsta uporabe

Ova je manžeta namijenjena za višestruku uporabu na više pacijenata.

Ograničenje

Opseg pacijentove ruke mora biti od 22 do 32 cm.

Indikacija

Ovaj uređaj upotrebljavaju zdravi pojedinci, pacijenti s povišenim krvnim tlakom, pacijenti koji su zdravstveno osviješteni pojedinci u općenitoj situaciji kod kuće za mjerenje krvnog tlaka i brzine pulsa.

Primanje i pregled

Izvucite ovu manžetu iz ambalaže i provjerite ima li oštećenja. Ako je ova manžeta oštećena, NE UPOTREBLJAVAJTE je i posavjetujte se s lokalnim zastupnikom tvrtke OMRON.

Važne sigurnosne informacije

Kontraindikacije

- NE upotrebljavajte ovu manžetu na ozlijeđenoj ruci ili ruci koja se liječi.
- NE stavljajte manžetu na ruku na koju je spojen intravenozni drip ili cijev za transfuziju krvi.
- NE upotrebljavajte ovu manžetu na dojenčadi, bebama, djeci ili osobama koje se ne znaju izraziti.

Nuspojave

- Izvođenjem mjerenja češće nego što je potrebno mogu nastati modrice zbog ometanja krvnog protoka.
- Napuhavanje do tlaka višeg od potrebnog može dovesti do modrica na ruci gdje je manžeta bila postavljena.
- Ako nastane iritacija kože ili osjetite neugodu, prestanite upotrebljavati manžetu i posavjetujte se sa svojim liječnikom.



Upozorenje

Ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbjegne, može rezultirati smrtnim ishodom ili ozbiljnom ozljedom.

- Da biste spriječili davljenje, držite cijev za zrak podalje od dojenčadi, beba i djece.
- Držite komponente izvan dohvata dojenčadi, beba ili djece. Ovaj proizvod sadržava sitne dijelove koji, ako se progutaju, mogu prouzročiti gušenje kod dojenčadi, beba i djece.



Mjera opreza


Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne, može dovesti do manjih ili umjerenih ozljeda korisnika ili pacijenta, ili izazvati oštećenje opreme ili druge imovine.

- Manžeta OMRON može se priključiti na razne tlakomjere OMRON. Ova manžeta radi samo s tlakomjerima OMRON koji su kompatibilni s HEM-CS24/HEM-CR24/HEM-RML31 u skladu s navedenim na naljepnici manžete do utičnice za zrak. Upotreba nekompatibilne manžete narušava kliničku točnost.
- Skinite usku i debelu odjeću s ruke za vrijeme mjerenja.
- Manžetu za ruku upotrebljavajte JEDINO na osobama čiji je opseg ruke u navedenom rasponu manžete.
- NEMOJTE prekomjerno gužvati manžetu za ruke ili savijati cijev za zrak.
- Prilikom mjerenja NEMOJTE presavijati ili izvijati cijev za zrak. Tako možete izazvati ozljedu ometajući protok krvi.
- Kada skidate čep za zrak, povucite plastični čep za zrak na dnu cijevi, a ne samu cijev.
- Provjerite koji utikač morate upotrijebiti za trenutni proizvod. Ako upotrijebite pogrešan utikač, možete prouzročiti propuštanje zraka i netočna očitavanja.

Upute za upotrebu

1 Priključite ispravn utikač cijevi za zrak na cijev za zrak.

2 Priključite manžetu za ruku u tlakomjer tako da utikač cijevi za zrak čvrsto umetnete u utičnicu za zrak.

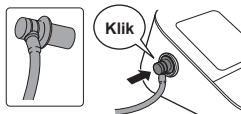


Napomena

Ako upotrebljavate utikač cijevi za zrak u skladu s prikazanim na slici na desnoj strani, svakako ga umetnite u utičnicu za zrak tako da se začuje zvuk klika.


3 Provucite ruku kroz orukvicu manžete. Povucite manžetu dok ne dosegne gornji dio lijeve ruke.



Donji rub manžete mora biti od 1 do 2 cm iznad unutarnje strane lakta. Cijev za zrak nalazi se s unutarnje strane ruke i poravnana je sa srednjim prstom.

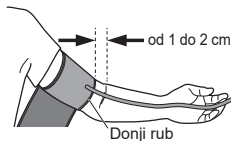

4 Pobrinite se da vam je cijev za zrak postavljena s unutarnje strane ruke i čvrsto omotajte manžetu tako da se ne može pomicati oko vaše ruke.

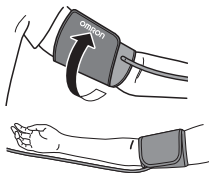

Obavljanje mjerenja na desnoj ruci

Cijev za zrak trebala bi ići duž bočne strane vašeg lakta, uz donji dio vaše ruke. Pazite da ne naslonite ruku na cijev za zrak.

Napomena: krvni tlak može se razlikovati između lijeve i desne ruke te se stoga mogu razlikovati i izmjerena očitavanja krvnog tlaka. OMRON preporučuje da uvijek na istoj ruci provodite mjerenje. Ako se očitavanja lijeve i desne ruke znatno razlikuju, posavjetujte se sa svojim liječnikom da odredite kojom ćete se rukom koristiti za mjerenje.

Održavanje






- Nemojte koristiti abrazivna ili hlapljiva sredstva za čišćenje.
- Obrišite manžetu za ruku mekom suhom krpom ili mekom krpom navlaženom blagim (neutralnim) deterdžentom, a zatim je obrišite suhom krpom.
- Ne perite i ne uranjajte manžetu za ruku u vodu.
- Nemojte upotrebljavati benzin, razrjeđivače ili slična otapala za brisanje manžete.
- Nemojte skladištiti manžetu na mjestima izloženim ekstremnim temperaturama, vlazi, izravnoj sunčevoj svjetlosti, prašini ili korozivnim parama poput para bjelila.

Specifikacije

Kategorija proizvoda	Neobavezni uređaj za elektroničke sfigmomanometre / tlakomjere krvnog tlaka
Opis proizvoda	Manžeta za tlakomjer za nadlakticu
Model (kod)	Srednja manžeta CM2 (HEM-CR24-E)
Opseg ruke	Od 22 do 32 cm
Dimenzije	Približno 146 mm x 446 mm
Raspon tlaka manžete	Od 0 do 299 mmHg
Točnost	±3 mmHg
Uvjeti okruženja	Od +10 °C do +40 °C / od 15 do 90 % relativne vlažnosti (bez kondenziranja) / od 700 do 1.060 hPa
Skladištenje / uvjeti transporta	Od -20 °C do +60 °C / od 10 do 95 % relativne vlažnosti (bez kondenziranja)
Težina	Ne više od 126 g
Sadržaj pakiranja	Manžeta, priručnik s uputama, priključci za zrak
Razdoblje trajanja (životni vijek)	Pet godina ili trenutak kada se dosegne 10.000 upotreba.
Jamstvo	1 godina

Ovaj proizvod OMRON proizveden je u skladnosti sa strogim sustavom kvalitete društva OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., JAPAN.

Opis simbola

	Oznaka CE		Oznaka UKCA
	Jedinstvena identifikacija proizvoda		Medicinski proizvod
	Ograničenje temperature		Ograničenje vlažnosti
	Ograničenje atmosferskog tlaka		Identifikacija manžeta kompatibilnih s uređajem
	Oznaka arterije	LATEX FREE	Nije proizvedeno od prirodnog gumenog lateksa
	Opseg ruke		Korisnik mora temeljito slijediti ovaj priručnik s uputama radi sigurnosti (Pozadina: plava).
	Datum proizvodnje		Oznaka recikliranja X: Broj materijala Y: Kratica materijala Pogledajte 97/129/EC za više informacija.
	Indikator pozicioniranja manžete za lijevu ruku	INDEX 	Pokazivač raspona i pozicije poravnjanja nadlaktične arterije
REF	Referentni kataloški broj	LOT	LOT broj
	Indikator opsega ruke pomaže u odabiru primjerene veličine manžete		
	Upute za recikliranje elemenata pakiranja		
	TECHNOLOGY BY OMRON HEALTHCARE IN JAPAN	Tehnologija društva OMRON Healthcare u Japanu	

Ovisno o proizvodu, neki od gore navedenih simbola možda neće biti primjenjivi na proizvodu.

Bilo koju tešku nezgodu koja nastane u vezi s ovim uređajem prijavite proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj imate nastan.

NEMOJTE upotrebljavati ovu manžetu uz tlakomjere krvnog tlaka koji nisu navedeni kao PODRŽANI modeli.

Proizvođač 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN			
Predstavništvo u Europskoj uniji <table border="1" data-bbox="63 244 178 282"> <tr> <td>EC</td> <td>REP</td> </tr> </table>	EC	REP	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp, NIZOZEMSKA www.omron-healthcare.com	
EC	REP			
Uvoznik u EU				
Proizvodni pogon	OMRON DALIAN Co., Ltd. No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian, 116600 Liaoning N. R. Kina			
Podružnice	Uvoznik za Ujedinjeno Kraljevstvo i odgovorna osoba za UK	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors		
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH / OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors			

Proizvedeno u Kini