


OMRON



CM2 vidējā izmēra aproce (HEM-CR24-E)

OMRON asinsspiediena mēritāja aproce

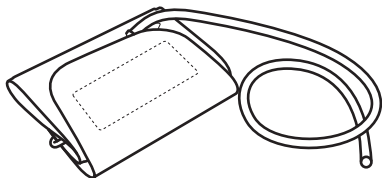

Lietošanas instrukcija

2 LV

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un piemērojamo „OMRON” asinsspiediena mērītāja lietošanas instrukciju. Saglabājiet to turpmākām uzziņām. Lai uzzinātu specifisku informāciju par savu asinsspiedienu, JAUTĀJIET ĀRSTAM.

Paredzētā lietošana

Paredzētais mērķis

Šī aproce ir paredzēta lietošanai „OMRON” asinsspiediena mērītājiem, kas mēra asinsspiedienu un pulsa ātrumu pieaugušiem pacientiem.

Paredzētie pacienti

Pieaugušo pacientu populācija

Paredzētie lietotāji

Pieaugušie lietotāji (var būt arī paši pacienti), kuri spēj saprast šo lietošanas instrukciju.

Kliniskais ieguvums

Pacienta asinsspiedienu var neinvazīvi un vienkārši izmērīt mājas apstākļos, izmantojot šo aproci un piemērojamo „OMRON” asinsspiediena mēraparātu.

Lietošanas veids

Šī aproce ir paredzēta daudzkārtējai lietošanai vairākiem pacientiem.

Ierobežojums

Pacienta rokas apkārtmēram jābūt robežās no 22 līdz 32 cm.

Norāde

Šo ierīci izmanto veseli cilvēki, pacienti ar hipertensiju, pacienti, kas rūpējas par savu veselību, vispārējā sadzīves situācijā, lai izmērītu asinsspiedienu un pulsa ātrumu.

Saņemšana un pārbaude

Izņemiet aproci no iepakojuma un pārbaudiet, vai tai nav bojājumu. Ja aproce ir bojāta, NELIETOJIET to un sazinieties ar vietējo „OMRON” pārstāvi.

Svarīga drošības informācija

Kontrindikācijas

- NELIETOJIET aproci uz savainotas rokas vai terapeitiski ārstējamās rokas.
- NELIECIET aproci uz savas rokas intravenozas infūzijas vai asins pārliešanas laikā.
- NELIETOJIET šo aproci jaundzimušajiem, zīdaiņiem, bērniem vai personām, kuras nespēj skaidri izteikt savas sajūtas.

Blakusparādības

- Veicot mērījumus biežāk nekā nepieciešams, asins plūsmas traucējumu dēļ var rasties zilumi.
- Ja iesūkņtais spiediens aprocē ir augstāks par nepieciešamo, aproces aplikšanas vietā var veidoties zilumi.
- Pārtrauciet lietot šo aproci un konsultējieties ar ārstu, ja rodas ādas kairinājums vai diskomforts.



Brīdinājums

Norāda iespējamu apdraudējumu, kas, ja to nenovērš, var izraisīt nāvi vai būtisku kaitējumu.

- Lai izvairītos no nožņaugšanās, neturiet gaisa cauruli jaundzimušo, zīdaiņu un bērnu tuvumā.
- Glabājiet sastāvdaļas jaundzimušajiem, zīdaiņiem vai bērniem neaizsniedzamā vietā. Šis izstrādājums satur sīkas detaļas, kuras nejauši norijot, var izraisīt aizrīšanas risku jaundzimušajiem, zīdaiņiem un bērniem.



Piesardzība

Norāda iespējamu apdraudējumu, kas nenovērsts var izraisīt lielāku vai mazāku kaitējumu ierīces lietotājam vai pacientam, vai arī sabojāt ierīci vai citus priekšmetus.

- OMRON aproce ir savienojama ar dažādiem OMRON asinsspiediena mērītājiem. Šī aproce darbojas tikai ar „OMRON” asinsspiediena mērītājiem, kas ir saderīgi ar HEM-CS24/HEM-CR24/HEM-RML31, kā norādīts aproces uzlīmē blakus gaisa padeves kontaktligzdai. Izmantojot nesaderīgu aproci, tiek ietekmēta klīniskā precizitāte.
- Pirms mērījuma veikšanas atbrīvojiet roku no cieši pieguļoša un bieza apģērba.
- Izmantojiet šo rokas aproci TIKAI personām, kuru rokas apkārtmērs atbilst aprocei norādītajam diapazonam.
- NELOKIET aproci vai gaisa caurulīti ar pārmērīgu spēku.
- Mērīšanas laikā NELOKIET un nesaspiediet gaisa caurulīti. Tas var radīt traumas, jo tiek pārtraukta asins cirkulācija.
- Lai atvienotu gaisa caurulītes uzgali, pavelciet plastmasas uzgali, turot to caurulītes pievienošanas vietā, nevis aiz caurulītes.
- Pārbaudiet izstrādājumu, lai noteiktu, kurš uzgalis jāizmanto. Nepareizā uzgaļa izmantošana var izraisīt gaisa noplūdi un neprecīzus rādījumus.

Lietošanas instrukcija

1 Gaisa caurulītei pievienojiet atbilstīgo gaisa uzgali.

2 Pievienojiet aproci savam mēraparātam, kārtīgi ievietojot hermētisko spraudni gaisa padeves kontaktligzdā, līdz atskan klikšķis.




Piezīme.

Ja izmantojat gaisa aizbāzni, kā parādīts attēlā kreisajā pusē, noteikti ievietojiet to gaisa ligzdā, līdz atskan klikšķis.

3 Ievietojiet savu roku aproces cilpā. Pavelciet aproci, līdz tā saskaras ar kreiso augšdelmu.




Aproces apakšmalai jāatrodas 1–2 cm virs elkoņa iekšpusē. Gaisa caurulītei jāatrodas rokas iekšpusē un jābūt virzītai uz vidējo pirkstu.

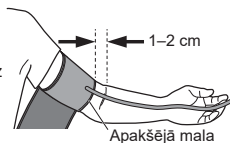

4 Pārliecinieties, ka gaisa caurulīte atrodas rokas iekšpusē, un cieši aplieciet aproci, lai tā nekustētos.

Mērīšana uz labās rokas

Gaisa caurulītei jāvirzās gar elkoni visā rokas apakšējās malas garumā. Uzmanieties, lai neuzliktu roku uz gaisa caurulītes.

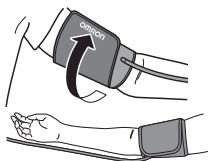

Piezīme: asinsspiediens labajā un kreisajā rokā var atšķirties, un izmērītā asinsspiediena rādījumi var atšķirties. „OMRON” iesaka mērīšanai vienmēr izmantot vienu un to pašu roku. Ja vērtības abām rokām būtiski atšķiras, konsultējieties ar ārstu, lai noteiktu, uz kuras rokas veikt mērījumus.

Apkope

- Neizmantojiet abrazīvus un ēteriskus tīrīšanas līdzekļus.
- Tīriet aproci, izmantojiet mikstu, sausu drānu vai mikstu drānu, kas samitrināta maigā (neitrālā) tīrīšanas līdzeklī, un pēc tam noslaukiet to ar sausu drānu.
- Nemazgājiet aproci ar ūdeni, kā arī neiegremdējiet to ūdenī.
- Netīriet aproci ar benzīnu, atšķaidītājiem vai līdzīgiem šķīdinātājiem.
- Neglabājiet aproci vietās, kas pakļautas pārmērigai temperatūrai, mitrumam, tiešiem saules stariem, putekļiem vai koroziju izraisošiem tvaikiem, piemēram, balinātāja tvaikiem.

Specifikācijas

Produkta kategorija	Elektronisko sfigmomanometru / asinsspiediena mērītāju papildierīce
Izstrādājuma apraksts	Asinsspiediena mērītāja aproce uz augšdelma
Modelis (kods)	CM2 vidējā izmēra aproce (HEM-CR24-E)
Rokas apkārtmērs	22–32 cm
Izmēri	Apm. 146 mm x 446 mm
Aproces spiediena diapazons	0–299 mmHg
Precizitāte	±3 mmHg
Darbības apstākļi	No +10 °C līdz +40 °C / no 15 līdz 90 % relatīvā mitruma (bez kondensēšanās) / no 700 līdz 1060 hPa
Uzglabāšanas/transportēšanas apstākļi	No -20 °C līdz +60 °C / no 10 līdz 95 % relatīvā mitruma (bez kondensēšanās)
Svars	Ne vairāk kā 126 g
Iepakojuma saturs	Aproce, lietošanas instrukcija, gaisa caurulītes uzgaļi
Derīguma periods (darbmūžs)	5 gadi vai pēc 10 000 lietošanas reizēm.
Garantija	1 gads

Šis „OMRON” izstrādājums ražots, ievērojot „OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.”, JAPĀNĀ, stingru kvalitātes kontroles sistēmu.


Simbolu apraksts

	CE marķējums		UKCA marķējums
	Ierīces unikālais identifikators		Medicīniska ierīce
	Temperatūras ierobežojums		Mitruma ierobežojums
	Atmosfēras spiediena ierobežojums		Identifikators aprocēs saderībai ar ierīci
	Artērijas novietojuma atzīme	LATEX FREE	Nesatur dabīgo kaučuka lateksu
	Rokas apkārtmērs		Lietotājam savas drošības nolūkos rūpīgi jāievēro ierīces lietošanas instrukcijā sniegtie norādījumi (fons: zils).
	Ražošanas datums		Pārstrādes marķējums X: materiāla numurs Y: materiāla saīsinājums Plašāku informāciju skatiet 97/129/EK lēmumā.
	Aprocēs novietojuma indikators kreisajai rokai	INDEX 	Diapazona un brahiālās artērijas novietojuma indikators
REF	Kataloga atsauces numurs	LOT	Partijas numurs
	Rokas apkārtmēra diapazona indikators, kas palīdz izvēlēties pareizā izmēra aproci		
	Norādījumi par iepakojuma elementu pārstrādi		
	TECHNOLOGY BY OMRON HEALTHCARE IN JAPAN OMRON Healthcare tehnoloģija, Japāna		

Atkarībā no izstrādājuma, daži no iepriekš norādītajiem simboliem var neattiekties un šo izstrādājumu.

Lūdzu, ziņojiet ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā esat reģistrēts, par jebkādu nopietnu incidentu, kas noticis saistībā ar šo ierīci.

NEIZMANTOJIET šo aproci ar citiem asinsspiediena mērītājiem, kas nav norādīti kā ATBALSTĪTIE modeļi.

Ražotājs 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPĀNA			
Pārstāvis Eiropas Savienībā <table border="1" data-bbox="63 244 178 282"> <tr> <td>EC</td> <td>REP</td> </tr> </table>	EC	REP	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Wegalaan 73, 2132 JD Hoofddorp, NĪDERLANDE www.omron-healthcare.com	
EC	REP			
Importētājs ES				
Ražotne	OMRON DALIAN Co., Ltd. No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian, 116600 Liaoning Ķīnas Tautas Republika			
Filiāles	Importētājs un atbildīgā persona Lielbritānijā	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, APVIENOTĀ KARALISTE www.omron-healthcare.com/distributors		
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH / OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors			

Ražots Ķīnā