

Prodloužená manžeta CW


Manžeta pro normální i silnou paži k měřičům
krevního tlaku Omron

• *Návod k obsluze*

2 CZ

Datum vydání: 2023-06-27

Prodloužená manžeta CW (HEM-RML30)

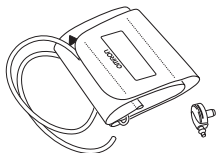

Děkujeme vám za zakoupení prodloužené manžety společnosti OMRON. Obvod paže pro tuto manžetu je 22 až 42 centimetrů. Prodloužená manžeta společnosti OMRON může být připojena na různé monitory krevního tlaku společnosti OMRON. Viz originální návod Vašeho měřiči krevního tlaku. Ověřte si prosím, kterou zástrčku na vašem přístroji je třeba použít. Při použití nesprávné koncovky může dojít k úniku vzduchu a nesprávným výsledkům.

Z bezpečnostních důvodů je nutno pozorně dodržovat tento návod.


Návod si ponechte pro budoucí použití. Podrobné informace o vašem krevním tlaku vám poskytne VÁS OŠETRUJÍCÍ LÉKÁŘ.

Upozornění

- S touto manžetou používejte pouze schválený monitor krevního tlaku.
- Manžetu neperte ani nenamáčejte.

Návod k obsluze


1.

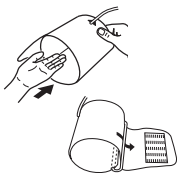

1. Protáhněte levou paži skrz smyčku manžety.

Poznámka: Pokud je manžeta rozložená, provlékněte konec manžety, který se nachází dále od hadice, kovovým prstencem ve tvaru D tak, aby vznikla smyčka. Hladká látka musí být uvnitř smyčky manžety.

2.

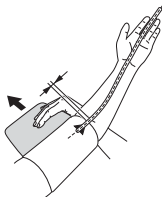


2. Dejte paži do správné polohy.

- 1) Vzduchová hadička by měla směřovat dolů podle vnitřní strany vašeho předloktí a měla by být souběžně s vaším prostředníčkem.
- 2) Spodní strana manžety by měla být asi 1 až 2 cm nad vaším loktem.
- 3) Umístěte manžetu na paži tak, aby byla značka (šipka pod hadičkou) vystředěna na vnitřní části paže a odtud směřovala dolů.

Poznámky:

- Nepoužívejte manžetu na hrubý oděv a nevyhrnujte si rukáv, je-li příliš těsný.
- Manžetu vyrovnějte do výšky vašeho srdce (do výšky prsou). V případě potřeby použijte polštářek nebo jinou vhodnou podložku k podepření lokte.

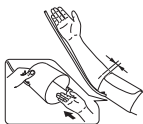

3.



Údržba

Měření na pravé paži

Upevněte manžetu tak, aby vzduchová hadička vedla kolem lokte na straně malíčku.

- Dávejte pozor, abyste se neopírali ramenem o vzduchovou hadičku, anebo jinak neomezovali přívod vzduchu do manžety.
- Manžeta by měla být umístěna 1 až 2 cm nad loktem.

3. Poté, co je manžeta správně umístěna, **PEVNĚ** utáhněte pásek se suchým zipem.

- Skvrny na manžetě lze opatrně odstranit pomocí vlhkého hadříku a mýdlové vody.
- Manžetu ani vzduchovou hadičku společně nepřehýbejte příliš těsně ani nemačkejte.
- Manžetu neskladujte za následujících okolností:
 - Manžeta je mokrá.
 - Na místech vystavených extrémním teplotám, vlhkosti, přímému slunečnímu světlu nebo korozivním výparům.
 - Na místech vystavených vibracím či úderům nebo na nakloněných plochách.



















Technické údaje:

Popis výrobku	Manžeta měřiče krevního tlaku OMRON
Model	Prodloužená manžeta CW (HEM-RML30)
Obvod paže	22 až 42 cm
Rozměry manžety	Přibližně 563 mm x 151 mm
Rozsah tlaku manžety	Tlak: 0 až 299 mmHg
Přesnost	Tlak: ± 3 mmHg
Klasifikace	Třída I
Provozní podmínky	+10 až +40 °C (50 až 104 °F) 15 až 90% vlhkosti (bez kondenzace) 700 až 1060 hPa
Podmínky pro skladování a přepravu	-20 až +60 °C (-4 až 140 °F) Vlhkost 10 až 95 % (bez kondenzace) 700 až 1060 hPa
Obsah balení	Manžeta, návod k obsluze, vzduchové zástrčky
Životnost (provozovatelnost), záruka	1 rok



Veškeré závažné incidenty, ke kterým došlo v souvislosti s tímto zařízením, oznamte výrobci a příslušnému úřadu v členském státě, ve kterém sídlíte.

Popis symbolů

	Označení CE
	Značení UKCA
	Číslo šarže
	Jedinečný identifikátor prostředku
	Zdravotnický prostředek
	Omezení teploty
	Omezení vlhkosti
	Omezení atmosférického tlaku
	Identifikátor manžet kompatibilních se zařízením
	Indikátor umístění manžety pro levou ruku
	Ukazatel rozsahu a poloha pro zarovnání na brachiální tepnu
	Značka na manžetě musí být umístěna nad artérií.
LATEX FREE	Není vyrobeno z latexu
	Indikátor rozsahu obvodu paže, který pomáhá volbě správné velikosti manžety.
	Referenční katalogové číslo
	Manžeta Easy Cuff
	Manžeta Intelli Wrap
	Komfortní manžeta
 TECHNOLOGY BY OMRON HEALTHCARE IN JAPAN	Technologie společnosti OMRON Healthcare, Japonsko



Datum výroby



Uživatel si musí prostudovat návod k obsluze.



Obvod paže

Datum výroby je součástí sériového čísla, které je umístěno na produktu a/nebo prodejním balení: první 4 číslice představují rok výroby, další 2 číslice měsíc výroby a poslední 2 číslice den výroby.

Výrobce 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKO		
Zástupce pro EU <table border="1" data-bbox="60 861 176 895"> <tr> <td>EC</td> <td>REP</td> </tr> </table>	EC	REP	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIZOZEMSKO www.omron-healthcare.com
EC	REP		
Dovozce do EU			
Výrobní závod	OMRON DALIAN Co., Ltd. No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600, Čína		
Pobočky	Dovozce ve Spojeném království a zodpovědná osoba pro UK OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors		
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors		
	OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors		

Vyrobeno v Číně.

Tento produkt společnosti OMRON je vyroben v souladu s přísným systémem pro kontrolu kvality společnosti OMRON Healthcare Co., Ltd., Japonsko.