

CW universalmanchet

Universalmanchet

• *Brugsanvisning*

2 DA

Udstedelsesdato: 2023-06-27

CW universalmanchet (HEM-RML30)




Tak, fordi du har købt OMRONS universalmanchet. Armomkredsen for denne manchet er 22 til 42 cm. OMRONS universalmanchet kan sluttes til forskellige OMRON-blodtryksapparater. Se brugervejledningen, der fulgte med dit blodtryksapparat. Se dit nuværende produkt for at se, hvilket stik der skal anvendes. Brug af det forkerte stik kan forårsage luftlækage og forkerte aflæsninger.

Følg denne brugervejledning nøje af hensyn til din sikkerhed. Gem den til senere brug. KONTAKT DIN LÆGE for at få specifikke oplysninger om dit eget blodtryk.


! Forsigtig

Brugsanvisning

1.

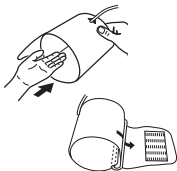

2.

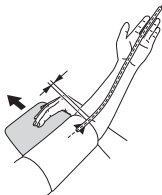

- Anvend kun det godkendte blodtryksapparat til denne manchet.
- Vask ikke manchetten, og gør den ikke våd.

1. Før venstre arm gennem manchetten.


Bemærk: Hvis manchetten ikke er samlet, føres den ende af manchetten, der er længst væk fra slangen, gennem D-ringen af metal, så der dannes en løkke. Det bløde stykke stof skal sidde indvendigt i manchetten.

2. Placer armen korrekt.

- 1) Luftslangen skal gå ned langs indersiden af underarmen på linje med din langfinger.
- 2) Manchettens nederste kant skal sidde ca. 1 til 2 cm over albuen.
- 3) Placer manchetten på overarmen, så mærket (pil under slangen) sidder midt på underarmen og peger ned langs indersiden af armen.

Bemærkninger:

- Manchetten må ikke anbringes oven på tykt tøj, og ærmet må ikke rulles op, hvis det er for stramt.
- Placer manchetten i højde med dit hjerte (brysthøjde). Brug om nødvendigt en pude eller hynde.

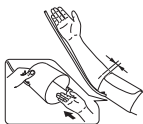

3.



Vedligeholdelse

Sådan foretager du målinger på højre arm

Placer manchetten, så luftslangen sidder på siden af albuen.

- Pas på ikke at lade armen hvile på luftslangen, da det kan begrænse luftstrømmen til manchetten.
- Manchetten skal sidde 1-2 cm over albuen.

3. Når manchetten er anbragt korrekt, lukkes stoffastgøringen FAST.

- Pletter på manchetten kan forsigtigt fjernes med en fugtig klud og sæbevand.
- Fold ikke manchetten eller luftslangen for hårdt sammen, og krøl dem ikke sammen.
- Manchetten må ikke opbevares ved følgende forhold:
 - Hvis manchetten er våd.
 - På steder med ekstreme temperaturer, fugtighed, direkte sollys, støv og ætsende dampe.
 - På steder, der er udsat for vibrationer, stød, eller hvor den står skråt.

Specifikationer:



















Produktbeskrivelse	Manchet til OMRON-blodtryksapparat
Model	CW universalmanchet (HEM-RML30)
Armomkreds	22 til 42 cm
Manchetmål	Ca. 563 mm x 151 mm
Manchettens trykomsråde	Tryk: 0 til 299 mmHg
Nøjagtighed	Tryk: ± 3 mmHg
Klassifikation	Klasse I
Anvendelsesforhold	+10 til +40°C (50 til 104°F) 15 til 90% RH (ikke-kondenserende) 700 til 1060 hPa
Opbevarings-/transportforhold	-20 til +60°C (-4 til 140°F) 10 til 95% RH (ikke-kondenserende) 700 til 1060 hPa
Pakkens indhold	Manchet, brugervejledning, luftstik
Levetid, garanti	1 år

DA



Venligst indrapporter eventuelle alvorlige hændelser, der er opstået i forbindelse med dette apparat, til producenten og de kompetente myndigheder i det medlemsland, du bor i.

Symbolbeskrivelse

	CE-mærke
	UKCA-mærkning
	Partinr.
	Unik enhedsidentifikator
	Medicinsk udstyr
	Temperaturbegrænsning
	Fugtighedsbegrænsning
	Begrænsning for atmosfærisk tryk
	Identifikator for manchetter, der er kompatible med apparatet
	Manchetplaceringsindikator for venstre arm
	Områdemarkør og justeringsposition for arteria brachialis
	Markør på manchetten, placeres over åren
LATEX FREE	Indeholder ikke naturlig gummilatex
	Områdeindikator for armomkreds som hjælp til valg af korrekt manchetstørrelse
	Referencekatalognummer
	Easy Cuff
	Intelli Wrap-manchet
	Comfort-manchet
 TECHNOLOGY BY OMRON HEALTHCARE IN JAPAN	Teknologi fra OMRON Healthcare i Japan



Produktionsdato



Læs brugervejledningen



Armomkreds

Produktets produktionsdato er integreret i serienummeret, der sidder på produkt- og/ eller salgseballagen: De første 4 cifre står for produktionsåret, de næste 2 cifre for produktionsmåneden, og de sidste 2 cifre for produktionsdagen.

Producent 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN		
EU-repræsentant <table border="1" data-bbox="63 882 177 918"> <tr> <td>EC</td> <td>REP</td> </tr> </table>	EC	REP	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLAND www.omron-healthcare.com
EC	REP		
Importør i EU			
Produktionsanlæg	OMRON DALIAN Co., Ltd. No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600, Kina		
Datterselskaber	Importør i Storbritannien og ansvarlig person i Storbritannien OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors		
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors		
	OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors		

Fremstillet i Kina

Dette OMRON-produkt er fremstillet efter det strenge kvalitetssystem hos OMRON Healthcare Co., Ltd., Japan.