

Περιχειρίδα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους CW Περιχειρίδα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους


• Οδηγίες χρήσης

2

EL

Ημερομηνία έκδοσης: 2023-06-27

Περιχειρίδα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους CW (HEM-RML30)

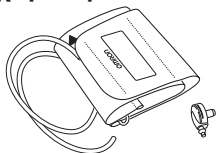


Ευχαριστούμε που αγοράσατε την περιχειρίδα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους της OMRON. Η περιφέρεια του βραχιόνια για αυτήν την περιχειρίδα πρέπει να είναι 22 έως 42 εκατοστά. Η περιχειρίδα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους της OMRON μπορεί να συνδεθεί σε διάφορα πιεσόμετρα της OMRON. Ανατρέξτε στο πρότυπο εγχειρίδιο οδηγιών του πιεσόμετρου σας. Ελέγξτε το προϊόν που διαθέτετε αναφορικά με το βύσμα που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Συνδέστε το σωστό βύσμα αέρα στο σωλήνα αέρα.

Ακολουθήστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πιστά για την ασφάλειά σας. Φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα πίεσης του αίματός σας, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΑΣ.


⚠ Προσοχή

Οδηγίες χρήσης

1.

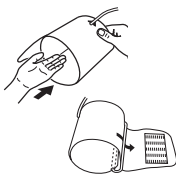

2.

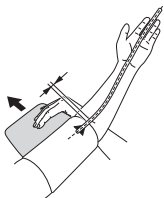

- Χρησιμοποιείτε μόνο το εγκεκριμένο πιεσόμετρο για αυτήν την περιχειρίδα.
- Μην πλύνετε ή βρέξετε την περιχειρίδα.

1. Περάστε το αριστερό σας χέρι μέσα από το βρόχο της περιχειρίδας.


Σημείωση: Εάν η περιχειρίδα δεν είναι συναρμολογημένη, περάστε το άκρο της περιχειρίδας με τη μεγαλύτερη απόσταση από το σωλήνα μέσα από το μεταλλικό δακτύλιο D για να σχηματίσετε το βρόχο. Το μαλακό ύφασμα πρέπει να βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του βρόχου της περιχειρίδας.

2. Τοποθετήστε το χέρι σας σωστά.

- 1) Ο σωλήνας αέρα πρέπει να εκτείνεται στην εσωτερική πλευρά του αντιβραχίου και να βρίσκεται στην ευθεία του μεσαίου δακτύλου σας.
- 2) Το κάτω μέρος της περιχειρίδας πρέπει να βρίσκεται 1 έως 2 cm περίπου πάνω από τον αγκώνα.
- 3) Εφαρμόστε την περιχειρίδα στο μπράτσο σας έτσι ώστε ο δείκτης (βέλος κάτω από το σωλήνα) να βρίσκεται στο κέντρο της εσωτερικής πλευράς του χεριού σας και να δείχνει προς τα κάτω.

Σημειώσεις:

- Μην τοποθετείτε την περιχειρίδα πάνω από χοντρά ρούχα και μην τυλίγετε το μανίκι σας, εάν σας σφίγγει πολύ.
- Ευθυγραμμίστε την περιχειρίδα με το ύψος της καρδιάς (στο ύψος του στήθους). Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα μαξιλάρι.

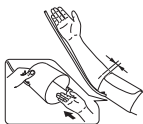

3.



Συντήρηση

Λήψη μετρήσεων από το δεξιό χέρι

Εφαρμόστε την περιχειρίδα έτσι ώστε ο σωλήνας αέρα να βρίσκεται στο πλάι του αγκώνα σας.

- Προσέξτε να μη στηρίζετε το χέρι σας πάνω στο σωλήνα αέρα, ή να μην περιορίσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τη ροή του αέρα προς την περιχειρίδα.
- Η περιχειρίδα πρέπει να τοποθετηθεί 1 με 2 cm πάνω από τον αγκώνα.

3. Αφού τοποθετήσετε σωστά την περιχειρίδα, δέστε ΣΦΙΧΤΑ την υφασμάτινη ταινία ασφάλισης.

- Για να αφαιρέσετε λεκέδες από την περιχειρίδα, χρησιμοποιήστε προσεκτικά ένα βρεγμένο πανί και νερό με σαπουνάδα.
- Μη διπλώνετε πολύ σφιχτά την περιχειρίδα ή το σωλήνα αέρα και μη δημιουργείτε ζάρες.
- Μην αποθηκεύετε την περιχειρίδα υπό τις παρακάτω συνθήκες:
 - Αν η περιχειρίδα είναι βρεγμένη.
 - Σε μέρη εκτεθειμένα σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σκόνη ή διαβρωτικούς ατμούς.
 - Σε μέρη εκτεθειμένα σε κραδαμούς, δονήσεις ή όπου θα βρίσκεται σε κλίση.



















Προδιαγραφές:

Περιγραφή προϊόντος	Περιχειρίδα πιεσόμετρου OMRON
Μοντέλο	Περιχειρίδα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους CW (HEM-RML30)
Περιφέρεια χεριού	22 έως 42 cm
Διαστάσεις περιχειρίδας	Περίπου 151 mm x 563 mm
Εύρος πίεσης περιχειρίδας	Πίεση: 0 έως 299 mmHg
Ακρίβεια	Πίεση: ±3 mmHg
Κατηγορία	Κλάση I
Συνθήκες λειτουργίας	+10 ως +40°C (50 ως 104°F) 15 έως 90% RH (Σχετική υγρασία) (μη συμπυκνωμένη) 700 έως 1060 hPa
Συνθήκες αποθήκευσης/μεταφοράς	-20 ως +60°C (-4 ως 140°F) 10 έως 95% RH (Σχετική υγρασία) (μη συμπυκνωμένη) 700 έως 1060 hPa
Περιεχόμενα συσκευασίας	Περιχειρίδα, εγχειρίδιο οδηγιών, βύσματα αέρα
Περίοδος ανθεκτικότητας (Διάρκεια ζωής προϊόντος), Εγγύηση	1 έτος



Αναφέρετε στον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου έχετε την έδρα σας κάθε σοβαρό περιστατικό που προκύπτει σε σχέση με αυτή τη συσκευή.

Περιγραφή συμβόλων

	Σήμανση CE
	Σήμανση UKCA
	Αριθμός παρτίδας
	Αποκλειστική ταυτοποίηση ιατροτεχνολογικού προϊόντος
	Ιατρική συσκευή
	Περιορισμός θερμοκρασίας
	Περιορισμός υγρασίας
	Περιορισμός ατμοσφαιρικής πίεσης
	Αναγνωριστικό περιχειρίδων συμβατές με τη συσκευή
	Ένδειξη προσδιορισμού θέσης περιχειρίδας για τον αριστερό βραχίονα
	Ένδειξη εύρους και θέση ευθυγράμμισης με τη βραχιονία αρτηρία
	Δείκτης στην περιχειρίδα για τοποθέτηση πάνω από την αρτηρία
LATEX FREE	Δεν κατασκευάζεται από latex από φυσικό καουτσούκ
	Ένδειξη εύρους περιφέρειας βραχίονα για βοήθεια στην επιλογή του σωστού μεγέθους περιχειρίδας
	Αριθμός καταλόγου αναφοράς
	Περιχειρίδα Easy
	Περιχειρίδα Intelli Wrap
	Άνετη περιχειρίδα
 TECHNOLOGY BY OMRON HEALTHCARE IN JAPAN	Τεχνολογία της OMRON Healthcare στην Ιαπωνία



Ημερομηνία κατασκευής



Ο χρήστης πρέπει να συμβουλευτεί το εγχειρίδιο οδηγιών



Περιφέρεια χεριού

Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος είναι ενσωματωμένη στον αριθμό παρτίδας, που βρίσκεται στο προϊόν ή/και στη συσκευασία πώλησης: τα πρώτα 4 ψηφία αντιστοιχούν στο έτος παραγωγής, τα επόμενα 2 ψηφία αντιστοιχούν στον μήνα παραγωγής και τα τελευταία 2 ψηφία αντιστοιχούν στην ημέρα παραγωγής.

Κατασκευαστής 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 ΙΑΠΩΝΙΑ		
Αντιπρόσωπος στην ΕΕ <table border="1" data-bbox="63 792 179 827"> <tr> <td>EC</td> <td>REP</td> </tr> </table>	EC	REP	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, ΟΛΛΑΝΔΙΑ www.omron-healthcare.com
EC	REP		
Εισαγωγέας στην ΕΕ			
Εργοστάσιο παραγωγής	OMRON (DALIAN) CO., LTD. No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600, Κίνα		
Θυγατρικές	Εισαγωγέας στο Ηνωμένο Βασίλειο και υπεύθυνος για το Ηνωμένο Βασίλειο OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ www.omron-healthcare.com/distributors		
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors		
	OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors		

Κατασκευάζεται στην Κίνα

Αυτό το προϊόν OMRON κατασκευάζεται σύμφωνα με το αυστηρό σύστημα ποιότητας της OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., ΙΑΠΩΝΙΑ.