

CW Široka manšeta


Široka manšeta

• *Upute za upotrebu*

2 HR

Datum izdavanja: 2023-06-27

CW Široka manšeta (HEM-RML30)

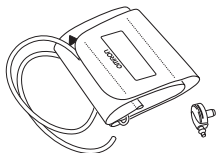

Zahvaljujemo na kupnji široke manšete OMRON. Opseg ruke za ovu manžetu je od 22 do 42 centimetra. Široka manšeta OMRON može se priključiti na različite vrste tlakomjera OMRON. Pogledajte originalni priručnik za svoj tlakomjer. Provjerite koji utikač morate upotrijebiti sa svojim proizvodom. Ako upotrijebite krivi utikač, možete prouzročiti propuštanje zraka i netočna očitavanja.


Radi vaše sigurnosti, pažljivo se pridržavajte ovih uputa za upotrebu. Sačuvajte ih za buduće potrebe. Točne podatke o svom krvnom tlaku ZATRAŽITE OD SVOG LIJEČNIKA.

Oprez

- Za ovu manžetu upotrebljavajte samo ovlaštenu tlakomjer.
- Manžetu nemojte prati ni močiti.

Upute za upotrebu


1.

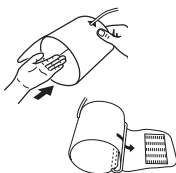

1. Provućite lijevu ruku kroz ovojnicu manžete.

Napomena: Ako manžeta nije sklopljena, provućite kraj manžete koji je najudaljeniji od cijevi kroz metalni D-prsten i oblikujte ovojnicu. Glatka tkanina mora se nalaziti s unutarnje strane ovojnice.


2.

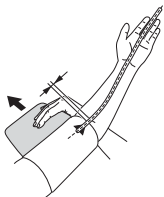

2. Postavite ruku na pravilan način.
- 1) Cijev za dovod zraka mora se prostirati niz podlakticu i mora biti u ravni sa srednjim prstom.
 - 2) Donji dio manžete mora biti približno 1 do 2 cm iznad pregiba lakta.
 - 3) Manžetu postavite na nadlakticu tako da oznaka (strelica ispod cijevi) bude centrirana na sredini unutarnje strane ruke i da bude okrenuta prema donjoj unutarnjoj strani ruke.

Napomene:

- Manžetu nemojte stavljati preko tijesne odjeće i nemojte zavrtati rukav ako je tijesan.
- Manžetu poravnajte s razinom srca (visina prsa). Po potrebi koristite jastuk ili podmetač.

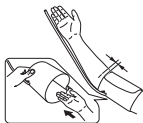

3.



Održavanje

Obavljanje mjerenja na desnoj ruci

Postavite manžetu tako da cijev za dovod zraka bude postrance na laktu.

- Pripazite da ruku ne oslonite na cijev za dovod zraka jer ćete u protivnom ograničiti protok zraka do manžete.
- Manžeta mora biti 1 do 2 cm iznad pregiba lakta.

3. Kad manžetu postavite na pravilan način, ČVRSTO zatvorite platneni čičak steznik.

- Mrlje na manžeti mogu se pažljivo ukloniti s pomoću vlažne krpe i vode sa sapunom.
- Manžetu i cijev za zrak nemojte čvrsto omatati niti ih presavijati.
- Manžetu nemojte spremati pod sljedećim uvjetima:
 - Manžeta je mokra.
 - Na mjestima koja su izložena ekstremnim temperaturama, vlazi, izravnoj sunčevoj svjetlosti, prašini ili korozivnim isparavanjima.
 - Na mjestima koja su izložena vibracijama, udarcima ili gdje će biti pod nagibom.



















Tehnički podaci:

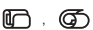Opis proizvoda	Manžeta za tlakomjer tvrtke OMRON
Model	CW Široka manžeta (HEM-RML30)
Opseg ruke	22 do 42 cm
Dimenzije manžeta	Približno 563 mm x 151 mm
Raspon tlaka manžete	Tlak: 0 do 299 mm Hg
Točnost	Tlak: ± 3 mmHg
Klasifikacija	Klasa I
Uvjeti okruženja	od +10 do +40 °C (od 50 do 104 °F) od 15 do 90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije) od 700 do 1060 hPa
Uvjeti spremanja/prijevoza	od -20 do +60 °C (od -4 do 140 °F) od 10 do 95% relativne vlažnosti (bez kondenzacije) od 700 do 1060 hPa
Sadržaj pakiranja	Manžeta, priručnik s uputama, priključci za zrak
Vrijeme trajanja (radni vijek), jamstvo	1 godina



Bilo koju ozbiljnu nezgodu koja se dogodi u vezi s ovim uređajem trebate prijaviti proizvođaču i mjerodavnom tijelu države članice u kojoj imate nastan.

Opis simbola

	Oznaka CE
	Oznaka UKCA
	LOT broj
	Jedinstvena identifikacija proizvoda
	Medicinski proizvod
	Ograničenje temperature
	Ograničenje vlažnosti
	Ograničenje atmosferskog tlaka
	Identifikator manžeta kompatibilnih s uređajem
	Indikator pozicioniranja manžete za lijevu ruku
	Pokazivač raspona i pozicije poravnanja nadlaktične arterije
	Oznaka na manžeti koju treba postaviti iznad arterije
LATEX FREE	Nije proizvedeno od prirodnog gumenog lateksa
	Indikator opsega ruke pomaže u odabiru primjerene veličine manžete
	Referentni kataloški broj
	Velika manžeta Easy
	Manžeta Intelli Wrap
	Manžeta Comfort
 TECHNOLOGY BY OMRON HEALTHCARE IN JAPAN	Tehnologija društva OMRON Healthcare u Japanu



Datum proizvodnje



Korisnik treba pogledati upute za rukovanje



Opseg ruke

Datum proizvodnje proizvoda ugrađen je u broj grupe koji se nalazi na proizvodu i/ili prodajnom pakiranju: prve četiri znamenke označavaju godinu proizvodnje, sljedeće dvije znamenke mjesec proizvodnje, a posljednje dvije znamenke označavaju dan proizvodnje.

Proizvođač 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN		
Predstavništvo u Europskoj uniji <table border="1" data-bbox="60 856 174 892"> <tr> <td>EC</td> <td>REP</td> </tr> </table>	EC	REP	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIZOZEMSKA www.omron-healthcare.com
EC	REP		
Uvoznik u EU			
Proizvodni pogon	OMRON DALIAN Co., Ltd. Br. 3, Song Jiang Road, Zona ekonomskog i tehnološkog razvoja, Dalian 116600, Kina		
Podružnice	Uvoznik za Ujedinjeno Kraljevstvo i odgovorna osoba za UK OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors		
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors		
	OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors		

Proizvedeno u Kini

Ovaj proizvod OMRON proizveden je u skladnosti sa strogim sustavom kvalitete
OMRON Healthcare Co., Ltd., Japan.