

CW Állítható mandzsetta


Állítható mandzsetta

• *Használati útmutató*

2 HU

Kiadás dátuma: 2023-06-27

CW Állítható mandzsetta (HEM-RML30)

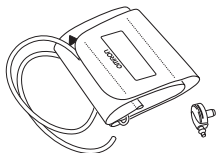

Köszönjük, hogy az OMRON állítható mandzsettát vásárolta meg. Ezzel a mandzsettával használható karátimérő 22 - 42 centiméter. Az OMRON állítható mandzsetta számos OMRON vérnyomásmérőhöz csatlakoztatható. Kérjük, tekintse meg a vérnyomásmérő felhasználói kézikönyvét. A használható csatlakozóval kapcsolatosan ellenőrizze az aktuális terméket. Ha nem a megfelelő csatlakozót használja, akkor a levegő kiszivároghat és pontatlanok lehetnek a mérési eredmények.

A biztonságos üzemeltetés érdekében kérjük, mindig kövesse a használati útmutató iránymutatásait.


Kérjük, tartsa meg későbbi tájékozódás céljából. Az Ön vérnyomására vonatkozó információkért KÉRDEZZE MEG ORVOSÁT.

⚠ **Vigyázat!**

- Kizárólag az ehhez a mandzsettához való vérnyomásmérőt használja.
- A mandzsettát ne mossa ki, és ne nedvesítse meg.


Használati útmutató

1.

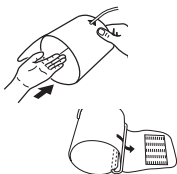

1. Helyezze bal karját a mandzsettába.


2.

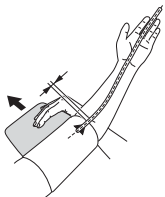

2. Helyezze el megfelelően a kart.
- 1) A levegőcsőnek a felkar belsején kell végighaladnia, és egy vonalban kell lennie a középső ujjával.
 - 2) A mandzsetta alsó részének körülbelül 1 - 2 cm-rel a könyök felett kell lennie.
 - 3) Helyezze a mandzsettát a felkarjára, hogy a jelölés (a tömlő alatti nyíl) a kar belső oldalának közepén legyen, és annak mentén lefelé mutasson.

Megjegyzések:

- Ne tegye a mandzsettát vastag ruhadarabokra, és ne hajtsa fel az ing ujját, ha nagyon szoros.
- Helyezze a mandzsettát szívmagasságba (mellmagasságba). Szükség esetén használjon párnát.

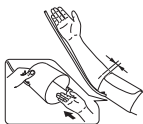

3.



Karbantartás

Vérnyomásmérés a jobb karon

Helyezze fel úgy a mandzsettát, hogy a levegőcső könyökének oldalához kerüljön.

- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a karját a levegőcsőre, mert ellenkező esetben elzárhatja a levegő útját a mandzsettához.
- A mandzsettának körülbelül 1 - 2 cm-rel a könyök felett kell lennie.

3. A mandzsetta megfelelő elhelyezése után zárja le SZOROSAN a mandzsettát.

- A mandzsettáról a szennyeződések nedves ronggyal és szappanos vízzel távolíthatók el.
- Ne hajtsa össze túl szorosan a mandzsettát vagy a levegőcsövet, és ne nyomja össze őket.
- Ne tárolja a mandzsettát a következő helyzetekben:
 - Ha a mandzsetta nedves.
 - Magas hőmérsékletnek, páratartalomnak, közvetlen napsütésnek, pornak vagy korrodáló gőzöknek kitett helyen.
 - Rezgésnek, ütésnek kitett helyen, vagy lejtős felületen.

Specifikációk:



















Termékleírás	Mandzsetta OMRON vérnyomásmérőhöz
Modell	CW Állítható mandzsetta (HEM-RML30)
Karkerület	22 - 42 cm
A mandzsetta mérete	Kb. 563 mm x 151 mm
Mandzsettanyomás tartománya	Nyomás: 0 - 299 Hgmm
Pontosság	Nyomás: ± 3 Hgmm
Besorolás	Class I
Működési körülmények	+10 és +40°C között (50 - 104°F) 15 - 90% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül) 700 - 1060 hPa
Tárolási/szállítási feltételek	-20 és +60°C között (-4 - 140°F) 10 - 95% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül) 700 - 1060 hPa
A csomag tartalma	Mandzsetta, használati útmutató, levegőcsatlakozók
Tartósság (élettartam), Garancia	1 év



Kérjük, tájékoztassa a gyártót és a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát minden, a készülékkel kapcsolatban bekövetkezett súlyos eseményről vagy problémáról.

HU

Szimbólumok leírása

	CE jelölés
	UKCA jelölés
	Gyártási szám
	Egyedi eszközazonosító
	Orvostechikai eszköz
	Hőmérsékletre vonatkozó korlát
	Páratartalomra vonatkozó korlát
	Légnyomásra vonatkozó korlát
	A készülékkel kompatibilis mandzsetták azonosítója
	Mandzsettapozicionáló jelzés a bal karhoz
	Méretsáv kijelzés és a felkarverőér igazítási pozíciója
	Jelzés a mandzsettán az artéria feletti pozicionáláshoz
LATEX FREE	Latexmentes
	Karkerület méretsávjának kijelzése a megfelelő méretű mandzsetta kiválasztásához
	Rendelési szám
	Easy Cuff
	Intelligens mandzsetta technológia
	Kényelmes mandzsetta
 TECHNOLOGY BY OMRON HEALTHCARE IN JAPAN	OMRON Healthcare technológia, Japán



A gyártás időpontja



A felhasználónak a használati útmutató leírásait kell követnie



Karkerület

A termék gyártási dátumát tartalmazza a gyártási szám, amely a terméken és/vagy a csomagoláson található: az első 4 számjegy jelenti a gyártás évét, a következő 2 számjegy a gyártás hónapját, az utolsó 2 számjegy pedig a gyártás napját.

Gyártó 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPÁN		
EU-képviselő <table border="1" data-bbox="60 856 177 893"> <tr> <td>EC</td> <td>REP</td> </tr> </table>	EC	REP	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLANDIA www.omron-healthcare.com
EC	REP		
EU importőr			
Termékképviselő	OMRON DALIAN Co., Ltd. No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600, Kína		
Leányvállalatok	Egyesült királysági importőr és UK felelős személy OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors		
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors		
	OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors		

Származási ország: Kína

Ez az OMRON termék a japán OMRON Healthcare Co., Ltd. szigorú minőségbiztosítási rendszerének megfelelően készült.