

CW stor mansjett

Stor mansjett

CW stor mansjett (HEM-RML30)




Takk for at du kjøpte OMRON stor mansjett. Armomkretsen for denne mansjetten er 22–42 cm. OMRON stor mansjett kan kobles til forskjellige blodtryksmålere fra OMRON. Se bruksanvisningen for blodtryksmåleren. Kontroller dette produktet for å finne ut hvilken kobling som skal brukes. Koble riktig luftkobling til luftslangen.

Følg denne bruksanvisningen nøye for din egen sikkerhets skyld. Oppbevar den for fremtidig bruk. RÅDFØR DEG MED LEGE hvis du ønsker spesifikk informasjon om blodtrykket ditt.


Forsiktig

Bruksanvisning

1.

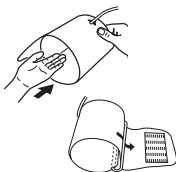

2.

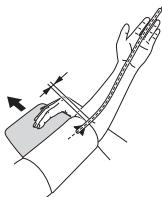

- Bruk kun den godkjente blodtryksmåleren for denne mansjetten.
- Ikke vask mansjetten eller la den bli våt.

1. Tre venstre arm gjennom mansjettløyken.


Merk: Hvis mansjetten ikke er montert, trer du enden av mansjetten som er lengst vekk fra slangen, gjennom D-ringen av metall, for å lage en løkke. Det myke stoffet skal være på innsiden av mansjettløyken.

2. Plasser armen riktig.

- 1)Luftslangen skal ligge ned langs innsiden av underarmen på linje med langfingeren.
- 2)Den nederste kanten på mansjetten skal være cirka 1–2 cm over albuen.
- 3)Plasser mansjetten på overarmen slik at markøren (pil under slangen) sentreres på og peker nedover innsiden av armen.

Merk:

- Ikke plasser mansjetten over tykke klær, og ikke rull opp ermet slik at det strammer.
- Plasser mansjetten i høyde med hjertet (brysthøyde). Bruk eventuelt en pute.

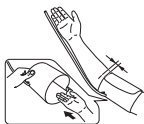

3.



Vedlikehold

Måle på høyre arm

Fest mansjette slik at luftslangen ligger på siden av albuen.

- Ikke hvil armen på luftslangen, luftstrømmen til mansjette må heller ikke begrenses på annen måte.
- Den nederste kanten på mansjette skal være 1–2 cm over albuen.

3. Når mansjette er plassert riktig, lukker du festestoffet stramt.

- Flekker på mansjette kan fjernes forsiktig med en fuktig klut og såpevann.
- Ikke pakk mansjette eller luftslangen for stramt sammen, og ikke brett dem.
- Ikke oppbevar mansjette i de følgende situasjonene:
 - Hvis mansjette er våt.
 - På plasseringer som er eksponert for ekstreme temperaturer, fuktighet, direkte sollys, støv eller etsende damp.
 - På plasseringer som er utsatt for vibrasjoner, støt eller hvor den vil være bøyd.



















Spesifikasjoner:

Produktbeskrivelse	OMRON mansjett til måling av blodtrykket
Modell	CW stor mansjett (HEM-RML30)
Armokrets	22 til 42 cm
Mansjettens mål	Cirka 151 mm x 563 mm
Mansjettens trykkområde	Trykk: 0–299 mmHg
Nøyaktighet	Trykk: ± 3 mmHg
Klassifisering	Klasse I
Bruksforhold	+10 til +40 °C (50 til 104 °F) 15 til 90 % RH (ikke kondenserende) 700 til 1 060 hPa
Oppbevarings-/transportforhold	-+20 til +60 °C (-4 til 140 °F) 10 til 95% RH (ikke kondenserende) 700 til 1 060 hPa
Innholdet i pakken	Mansjett, bruksanvisning, luftkoblinger
Holdbarhet (brukstid), garanti	1 år

NO



Meld fra til produsenten og vedkommende myndigheter i medlemsstaten du er etablert, dersom det oppstår alvorlige hendelser i forbindelse med denne enheten.

Symbolbeskrivelse	
	CE-merke
	UKCA-merking
	LOT-nummer
	Unik utstysidentifikator (UDI)
	Medisinsk enhet
	Temperaturbegrensning
	Luffuktighetsbegrensning
	Atmosfæretrykkbegrensning
	Identifikator av mansjetter som er kompatible for enheten
	Mansjettposisjoneringsindikator for venstre arm
	Områdepeker og innrettingsposisjon for brakialarterien
	Markør på mansjetten som skal plasseres over arterien
LATEX FREE	Ikke laget av naturlig gummlateks
	Områdeindikator for armomkretser som letter valget av riktig størrelse på mansjetten
	Referansekatalognummer
	Easy Cuff
	Intelli Wrap mansjett
	Comfort mansjett
 TECHNOLOGY BY OMRON HEALTHCARE IN JAPAN	Teknologi av OMRON Healthcare i Japan



Produksjonsdato



Brukeren må lese bruksanvisningen



Armokrets

Produktfabrikasjonsdato er integrert i partinummeret som er plassert på produktet og/eller salgsemballasjen: De første 4 sifrene er fabrikkårsår, de neste 2 sifrene er fabrikkasjonsmåned og de siste 2 sifrene er produksjonsdag.

Produsent 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN
EU-representant <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;"> <div style="border-right: 1px solid black; padding: 2px;">EC</div> <div style="padding: 2px;">REP</div> </div>	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NEDERLAND www.omron-healthcare.com
Importør i EU	www.omron-healthcare.com
Produksjonsanlegg	OMRON (DALIAN) CO., LTD. No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600, Kina
Filialer	Importør og ansvarlig person i Storbritannia OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors
	OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors

Produsert i Kina

Dette OMRON-produktet er produsert i henhold til det strenge kvalitetssystemet til OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., JAPAN.