

Manšeta z več možnostmi CW

Manšeta z več možnostmi


• *Navodila za uporabo*

2

SL

Izdano: 2023-06-27

Manšeta z več možnostmi CW (HEM-RML30)

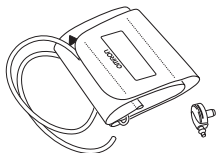

Zahvaljujemo se vam za nakup manšete z več možnostmi družbe OMRON. Manšeta je primerna za roko z obsegom od 22 do 42 centimetrov. Manšeto z več možnostmi družbe OMRON lahko priključite na različne merilnike krvnega tlaka družbe OMRON. Oglejte si originalni priročnik z navodili za merilnik krvnega tlaka. Vrsta priključka mora ustrezati merilniku. Če uporabite napačen vtič, lahko pride do puščanja zraka in nepravilnih meritev.


Prosimo, da zaradi lastne varnosti upoštevate ta priročnik z navodili. Hranite za nadaljnjo uporabo. Za posebne informacije o vašem krvnem tlaku SE POSVETUJTE S SVOJIM OSEBNIM ZDRAVNIKOM.

Pozor

- S to manšeto uporabljajte samo odobren merilnik krvnega tlaka.
- Manšete ne smete prati ali zmočiti.

Navodila za uporabo


1.

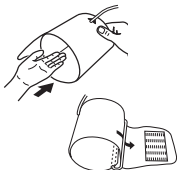

1. Levo roko vtaknite skozi zanko manšete.

Opomba: Če manšeta ni sestavljena, konec manšete, ki je najbolj oddaljen od cevke, vstavite skozi kovinski obroč v obliki črke D in oblikujte zanko. Gladka tkanina mora biti na notranji strani manšete.

2.

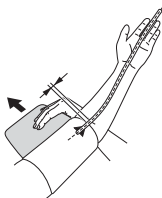


2. Roko pravilno namestite.

- 1) Zračna cev mora teči vzdolž notranje strani podlakti, v liniji sredinca.
- 2) Spodnji rob manšete mora biti približno 1 do 2 cm nad komolcem.
- 3) Manšeto namestite na nadlaket tako, da bo oznaka (modra puščica pod cevjo) na sredini roke in usmerjena navzdol proti dlani.

Opombe:

- Manšete ne namestite čez debela oblačila, rokava pa ne zavijajte, če je pretesen.
- Manšeta naj bo v višini srca (višina prsi). Po potrebi pod roko podložite navadno ali vzglavno blazino.

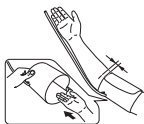

3.



Vzdrževanje

Izvajanje meritev na desni roki

Manšeto namestite tako, da bo zračna cev ob strani komolca.

- Ne naslanjajte se na zračno cev in na noben način ne omejujte dotoka zraka v manšeto.
- Spodnji rob manšete naj bo 1 do 2 cm nad komolcem.

3. Ko je manšeta pravilno nameščena, zaprite tekstilno zaponko, tako da se TESNO prilega roki.

- Madeže na manšeti lahko previdno odstranite z vlažno krpo in milnico.
- Ne stiskajte in ne pregibajte manšete in zračne cevi.
- Manšete ne shranjujte:
 - Če je manšeta mokra.
 - Na mestih, ki so izpostavljena skrajnim temperaturam, vlažnosti, neposredni sončni svetlobi, prahu ali jedkim hlapom.
 - Na mestih, ki so izpostavljena tresljajem, udarcem ali tam, kjer bi bila naprava nameščena pod kotom.



















Specifikacije:

Opis izdelka	Manšeta za merilnik krvnega tlaka OMRON
Model	Manšeta z več možnostmi CW (HEM-RML30)
Obseg roke	22 do 42 cm
Mere manšete	Pribl. 563 mm x 151 mm
Razpon tlakov manšete	Tlak: od 0 do 299 mmHg
Natančnost	Tlak: ± 3 mmHg
Razvrstitev	Razred I
Pogoji delovanja	+10 do +40 °C (50 do 104 °F) 15 do 90 % RV (brez kondenzacije) 700 do 1060 hPa
Pogoji shranjevanja/prevoza	-20 do +60 °C (-4 do 140 °F) 10 do 95 % RV (brez kondenzacije) 700 do 1060 hPa
Vsebina paketa	Manšeta, priročnik z navodili, zračni vtiči
Trajanje uporabnosti (življenjska doba), garancija	1 leto



V primeru resnih neželenih dogodkov v zvezi s to napravo obvestite proizvajalca in pristojni organ v državi članici, kjer imate sedež podjetja.

Opis simbolov

	Oznaka CE
	Oznaka UKCA
	Številka LOT
	Edinstveni identifikator pripomočka
	Medicinski pripomoček
	Omejitev temperature
	Omejitev vlažnosti
	Omejitev atmosferskega tlaka
	Oznaka manšet, združljivih s tem pripomočkom
	Indikator za namestitev manšete na levi roki
	Kazalnik razpona in položaj za poravnavo z nadlaktno arterijo
	Oznaka na manšeti, ki mora biti nameščena nad arterijo
LATEX FREE	Ni izdelano z uporabo lateksa iz naravnega kavčuka
	Indikator obsega roke, ki pomaga pri izbiri pravilne velikosti manšete
	Referenčna kataloška številka
	Easy Cuff
	Manšeta Intelli Wrap
	Komfortna manšeta
 TECHNOLOGY BY OMRON HEALTHCARE IN JAPAN	Tehnologija družbe OMRON Healthcare, Japonska



Datum izdelave



Uporabnik mora prebrati priročnik z navodili



Obseg roke

Datum izdelave izdelka je vključen v serijsko številko, ki se nahaja na etiketi izdelka in/ali prodajni embalaži: prve 4 številke označujejo leto, naslednji 2 mesec, zadnji 2 pa dan izdelave.

Proizvajalec 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKA
EU predstavnik <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> EC REP </div>	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIZOZEMSKA www.omron-healthcare.com
Uvoznik v EU	
Proizvodni obrat	OMRON DALIAN Co., Ltd. Št. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600, Kitajska
Podružnice	Uvoznik v Združenem kraljestvu in odgovorna oseba v Združenem kraljestvu OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors
	OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors

Izdelano na Kitajskem

Ta izdelek OMRON je proizveden pod strogim sistemom kakovosti podjetja OMRON Healthcare Co., Ltd., Japonska.