


## CW vid manschett

### Vid manschett

## CW vid manschett (HEM-RML30)

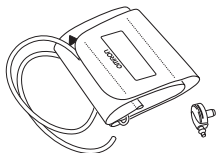


Tack för att du har valt den vida manschetten från OMRON. Armomkretsen för den här manschetten är 22 till 42 centimeter. OMRON:s vida manschett kan anslutas till olika blodtrycksmätare från OMRON. Se den ursprungliga användarhandboken till blodtrycksmätaren. Kontrollera vilken stickpropp du ska använda till din aktuella produkt. Användning av fel plugg kan orsaka läckage och felaktiga avläsningar.

**Av säkerhetsskäl är det viktigt att noggrant följa stegen i den här användarhandboken. Spara den för framtida bruk. Om du vill ha specifik information om ditt blodtryck, VÄND DIG TILL DIN LÄKARE.**


**! Var försiktig**

### Bruksanvisning

1.

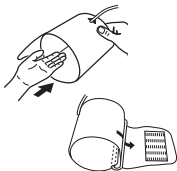

2.

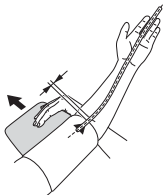

- Använd endast godkända blodtrycksmätare tillsammans med manschetten.
- Manschetten får inte tvättas eller blötas.

1. Placera vänster arm i manschettöglan.


**Obs!** Om manschetten inte är monterad sticker du in manschettändan som är längst bort från slangen genom D-ringen av metall så att det bildas en ögla. Det släta materialet ska vara på insidan av manschettöglan.

2. Placera armen i rätt ställning.

- 1)Luftslangen ska löpa längs underarmens insida i linje med långfingret.
- 2)Manschettens nederdel ska sitta 1 till 2 cm ovanför armbågen.
- 3)Sätt manschetten runt överarmen så att markören (pil under slangen) centreras mitt på armens insida och pekar nedåt längs armens insida.

**Obs!**

- Sätt inte manschetten över tjocka klädesplagg och rulla inte upp ärmen om den är alltför åtsittande.
- Rikta in manschetten med hjärtats nivå (brösthöjd). Använd en kudde vid behov.

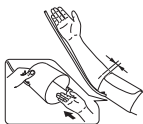

3.



## Underhåll

### Mäta på höger arm

Applicera manschetten så att luftslangen går vid sidan av armbågen.

- Var noga med att inte vila armen på luftslangen, eller på annat sätt förhindra luftflödet till manschetten.
- Manschetten ska sitta 1 till 2 cm ovanför armbågen.

3. När manschetten är i rätt läge fäster du NOGA med kardborrbandet.

- Fläckar på manschetten kan du försiktigt ta bort med en fuktig duk och tvålatten.
- Manschetten och luftslangen får inte vikas ihop alltför hårt och de får inte veckas.
- Förvara inte manschetten enligt följande:
  - Om manschetten är våt.
  - Platser utsatta för extrema temperaturer, fuktighet, direkt solljus, damm eller frätande ångor.
  - Platser som utsätts för vibrationer eller stötar, eller där den skulle ligga i en vinkel.



















### Specifikationer:

Produktbeskrivning	OMRON Blodtrycksmätarmanschett
Modell	CW vid manschett (HEM-RML30)
Armens omkrets	22–42 cm
Manschettens mått	Cirka 563 mm x 151 mm
Manschettens tryckmätarområde	Tryck: 0 till 299 mmHg
Exakthet	Tryck: $\pm 3$ mmHg
Klassificering	Klass I
Driftvillkor	+10 till +40°C (50 till 104°F) 15 till 90 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) 700–1 060 hPa
Förvarings-/transportförhållanden	-20 till +60°C (-4 till 140°F) 10 till 95 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) 700–1 060 hPa
Förpackningens innehåll	Manschett, användarhandbok, luftkontakter
Hållbarhetsperiod (livstid), garanti	1 år



Rapportera alla allvariga incidenter som har uppstått i samband med denna enhet till tillverkaren och den behöriga tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där du är bosatt.

### Beskrivning av symboler

	CE-märkning
	UKCA-märkning
	LOT-nummer
	Unik produktidentifiering
	Medicinteknisk produkt
	Temperaturgräns
	Fuktighetsgräns
	Gräns för atmosfäriskt tryck
	Identifiering av manschetter som är kompatibla med enheten
	Indikator för manschettens placering på vänster arm
	Intervallpekare och justeringsläge för armartären
	Markör på manschetten som ska placeras ovanför artären
<b>LATEX FREE</b>	Inte gjord av naturlig gummitalex
	Intervallindikator för armens omkrets för att underlätta val av rätt manschettstorlek
	Referens katalognummer
	Easy Cuff
	Intelli Wrap Cuff
	Comfort Cuff
 TECHNOLOGY BY OMRON HEALTHCARE IN JAPAN	Teknik från OMRON Healthcare i Japan



Tillverkningsdatum



Användaren måste rådfråga användarhandboken



Armens omkrets

Produktens tillverkningsdatum ingår i partinumret, vilket står på produkten och/eller förpackningen: de första fyra siffrorna står för tillverkningsåret, de efterföljande två siffrorna står för tillverkningsmånaden och de sista två står för tillverkningsdagen.

<b>Tillverkare</b> 	<b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b> 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN
<b>EU-representant</b> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;"> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">EC</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">REP</div> </div>	<b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b> Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NEDERLÄNDERNA <a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a>
<b>Importör i EU</b>	
<b>Produktionsenhet</b>	<b>OMRON DALIAN Co., Ltd.</b> No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600, Kina
<b>Dotterbolag</b>	<b>Importör i Storbritannien och ansvarig person i Storbritannien</b> <b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b> Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK <a href="http://www.omron-healthcare.com/distributors">www.omron-healthcare.com/distributors</a>
	<b>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH</b> <a href="http://www.omron-healthcare.com/distributors">www.omron-healthcare.com/distributors</a>
	<b>OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b> <a href="http://www.omron-healthcare.com/distributors">www.omron-healthcare.com/distributors</a>

Tillverkad i Kina