


Okos testösszetétel-elemző mérőkészülék
HN300T2 Intelli IT (HN-300T2-EBK / HN-300T2-EGY)

Használati útmutató

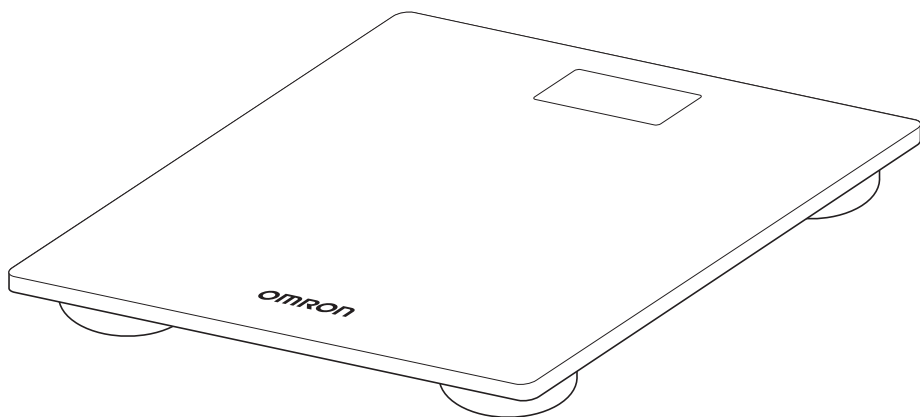

Tartalomjegyzék

Bevezetés	2
Fontos biztonsági információk	3
Ismerje meg a készüléket.....	5
Mérés előtt	7
Mérés.....	9
A mérési adatok továbbítása.....	10
Több felhasználó testsúlyának nyomonkövetése	11
Visszatérés az alapértelmezett beállításokhoz.....	12
Hibaüzenetek és hibaelhárítás	13
Karbantartás.....	14
Kalibrálás.....	14
Specifikációk.....	15
A készülék megfelelő elhelyezése (Elektromos és elektronikai eszközök hulladékkezelése)	16
Útmutató és gyártói nyilatkozat	16

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta az OMRON HN300T2 Intelli IT okos testösszetétel-elemző mérőkészüléket. Ez a termék elsősorban általános, otthonihasználatra alkalmas.

Biztonsági előírások

Ez a használati útmutató tartalmazza a termékkel kapcsolatos fontos információkat. A termék biztonságos és megfelelő használata érdekében OLVASSA EL és ÉRTELMEZZE ezeket az útmutatókat. **Ha nem érti teljes mértékben ezeket az utasításokat, vagy kérdése van, akkor a termék használata előtt vegye fel a kapcsolatot az OMRON viszonteladóval vagy forgalmazóval. Az Ön testsúlyára vonatkozó specifikus információkkal kapcsolatban konzultáljon orvosával.**

Alkalmazási terület

Az OMRON HN300T2 Intelli IT okos testösszetétel-elemző mérőkészülék a testsúly mérésére és a mérési eredmények megjelenítésére szolgál. Ez a termék kizárólag otthoni használatra készült.

Kicsomagolás és ellenőrzés

Távolítsa el a termék és a többi tartozék csomagolásátl és ellenőrizze, hogy van-e rajtuk bármilyen sérülés. Ha a termék vagy a többi tartozék sérült, akkor NE HASZNÁLJA a készüléket és vegye fel a kapcsolatot az OMRON viszonteladóval vagy forgalmazóval.

Fontos biztonsági információk

A készülék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatóban ismertetett Fontos biztonsági információkat! A biztonságos üzemeltetés érdekében mindig kövesse a használati útmutató iránymutatásait.

▲ Figyelmeztetés Potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amely, ha nem kerülük el, súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

- Konzultáljon orvosával vagy egészségügyi tanácsadójával, mielőtt súlycsökkentő- vagy edzésprogramba kezd.
- Hagyja abba a készülékhasználatát és forduljon azonnal orvosához, ha láb- vagy talpbőrén irritációt tapasztal.
- NE használja a készüléket csúszós felületeken, például nedves padlón.
- Olyan helyen tárolja a készüléket, ahol gyermekek, kisgyermekek és csecsemők nem férhetnek hozzá.
- NE ugorjon rá a készülékre. Ezzel azt kockáztatja, hogy elesik vagy megcsúszik, és súlyos sérüléseket szerezhet.
- NE használja a készüléket, ha a teste és/vagy a lába nedves, például fürdés vagy zuhanyzás után.
- NE lépjen a készülék szélére és a kijelző területre, mert így elveszítheti az egyensúlyát, eleshet és súlyos sérüléseket szerezhet.
- Fogyattákkal élők, vagy fizikailag gyenge személyek esetén a mérleg használatához segítségre lehet szükség ahhoz, hogy ne essenek le a készülékre történő fel- és lelépéskor.
- NE helyezze az ujját a készülék nyílásaiba vagy a belsejébe.
- Csak beltérben használja.
- A készüléket KIZÁRÓLAG a használati útmutatóban leírtakra használja.
- NE használja a készüléket más elektronikai orvosi (medical electrical - ME) berendezéssel egyszerre. Ez a készülékek működésében hibákat okozhat és/vagy hibás mérési eredményekhez vezethet.
- NE sértse meg az üveget. Az üveg betörhet és sérüléseket okozhat.

Az elemek használata

- Ha az elemekben található folyadék a szemébe, bőrére vagy a ruházatára kerül, azonnal öblítse ki bőséges tiszta vízzel. Azonnal forduljon orvoshoz, ha az elemekben található folyadék szemével vagy bőrével érintkezik.

Adatátvitel

- Ez a termék rádiófrekvenciás jeleket (RF) bocsát ki a 2,4 GHz-es frekvenciasávban. NE használja a készüléket olyan helyeken, ahol az RF kibocsátást korlátozzák, így például repülőgépeken vagy kórházakban.

▲ Vigyázat! Olyan potenciális veszélyhelyzetet jelez, amelynek bekövetkezése a felhasználó vagy páciens enyhe vagy közepes mértékű sérülését okozhatja, illetve a készülék és egyéb tulajdon fizikai károsodását eredményezheti.

- Ha lábukon bőrbetegségtől szenvedő személyek használták a készüléket, akkor a következő használat előtt mindig tisztítsa meg a készülékét.
- NE helyezze közvetlenül fal mellé vagy a falhoz támasztva a készüléket, mert ez balesethez, vagy a készülék hibás működéséhez vezethet.
- NE kísérelje meg szétszerelni, módosítani, vagy megjavítani a készüléket.
- NE helyezze a készüléket padlószőnyegre, szőnyegre, vagy hasonló puha felületre a mérésekhez, mert az eredmények így pontatlanok lehetnek.
- NE merítse víz alá a készüléket vagy annak bármely alkatrészét.
- NE helyezze a készüléket hőforrás közelébe vagy légkondicionáló berendezések alá.
- Ne tegye ki a készüléket napugárzás közvetlen hatásának.
- Óvja a készüléket az erős fizikai behatásoktól, a rezgésektől és az ütődésektől.
- NE mossa a készüléket vízzel.
- NE tisztítsa a készüléket benzollal, benzinnel, festékhígítóval és egyéb illékony oldószerekkel.
- NE helyezze a készüléket oda, ahol vegyi anyagok vagy korrozív gőzök hatásának lehet kitéve.
- A készüléket sík felületen tárolja.
- NE tároljon semmilyen tárgyat a készüléken.

Az elemek használata


- Az elhasznált elemeket haladéktalanul cserélje újra.
- NE tegye ki az elemeket lángok vagy tűz hatásának.
- Ne helyezze be az elemeket a jelzett polaritással ellentétes módon.
- CSAK 4 db „AAA” jelzésű mangán vagy alkáli elemet használjon a készülékhez. NE használjon más típusú elemeket. NE használjon együtt régi és új elemet. Mind a 4 elemet egyszerre cserélje.
- NE használjon különböző típusú elemeket egymással.
- A készüléket, az elemeket és a készülék alkatrészeit a hulladékkezelés helyi szabályozásainak megfelelően kezelje. A szabálytalan hulladékkezelés súlyos környezetszennyezést eredményezhet.
- Vegye ki az elemeket, ha a készüléket legalább 3 hónapig nem használja.
- NE használja az elemeket szavatossági idejük lejártá után.
- Mérés közben ellenőrizze, hogy a készülék 30 cm-es környezetében ne legyen mobil eszköz és semmi egyéb olyan elektromos berendezés, amely elektromágneses mezőt generál. Ez a készülék működésében hibákat okozhat és / vagy pontatlanná teheti a mérést.

Adatátvitel


- NE cseréljen elemet, miközben a készülék mérési eredményeket küld az okos eszközre. Ez a készülék meghibásodásához és a mérési adatok átvitelének hibájához vezethet.
- Ha a készülék mérési adatokat visz át okos eszközére, akkor NE használjon a közelében integrált áramkört kártyákat, mágneseket, fém tárgyakat vagy egyéb olyan eszközt, amely elektromágneses mezőt gerjeszt. Ez a készülék meghibásodásához és a mérési adatok átvitelének hibájához vezethet.

Ismerje meg a készüléket


A csomag tartalma

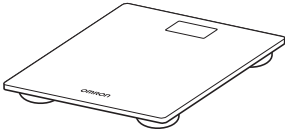

Digitális személymérleg

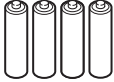

4 „AAA” mangán elem

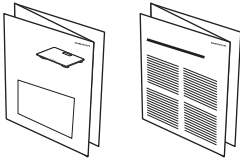

Használati útmutató

Alkalmazás használati adatlap (Hogyan követhető nyomon több felhasználó súlya?)




Korlátozott garanciaalap


A termék ismertetése

Készülék:


Előlnézet

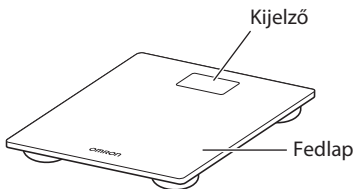

Vissza

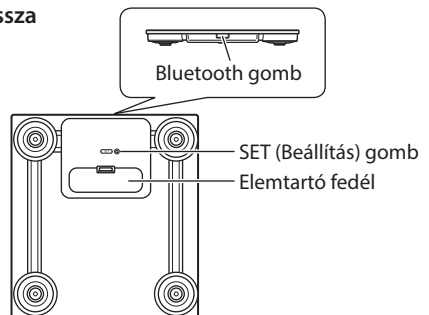

Kijelző:

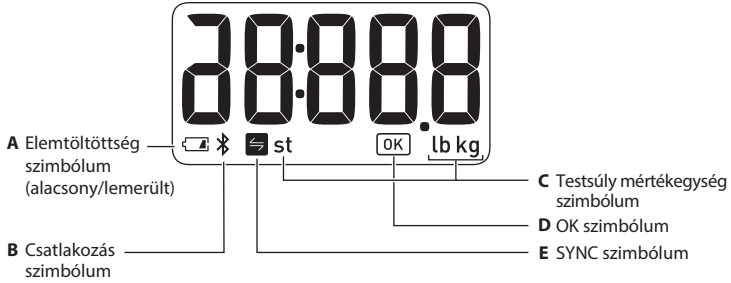


A kijelzőn megjelenő szimbólumok

A		Villog, ha az elemek töltöttsége alacsony.
		Villog, ha az elemek töltöttsége teljesen lemerült.
B		Villog, ha a mérleget egy okos eszközhöz csatlakoztatja, vagy éppen mérési eredményeket továbbít, vagy a mérleget visszaállítja alapértelmezett beállításaira.
C	st lb kg	Villog, ha kiválasztja a mértékegységet, és megjelenik a mérés közben.
D		Villog, ha a készülék csatlakozott az okos eszközhöz, vagy a mérési eredmények sikeresen átvitelre kerültek.
E		Megjelenik, ha a mérési eredmény nem került továbbításra a készülék és az okos eszköz társítása után.


Mérés előtt

1. Az elemek behelyezése

- 1 Nyissa ki a készülék hátulsó részén található elemtartó fedelet.

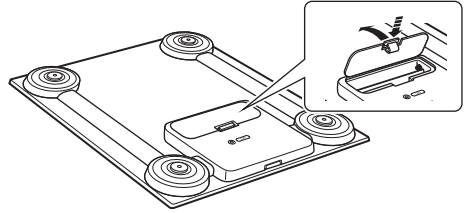


- 2 Az elemtartó belsején és jobb oldalán látható polaritásjelzéseket követve helyezze be az elemeket.

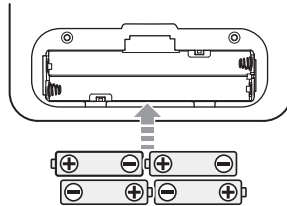

- 3 Zárja be az elemtartó fedelet.


Megjegyzés

- Helyezze a készüléket kemény, sima és sík padlófelületre az elemek behelyezése után. A készülék a kalibrációt automatikusan elvégzi.
- Ha megjelenik a „” szimbólum és az „A1” jelzés, akkor cserélje ki mind a 4 elemet. A memóriában tárolt adatokat a mérleg megőrzi az elemek eltávolítása esetén is.
- A használt elemek hulladékkezelését a használt elemek elhelyezésére vonatkozó helyi szabályozásoknak megfelelően kell elvégezni.

2. A testsúly mértékegység kiválasztása

- 1 Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg a [SET] gombot a kívánt mértékegység kiválasztásához: „kg”, „lb” vagy „st”.


A mérlegen az alapértelmezett mértékegység a „kg”.
A testsúly mértékegységét 10 másodperc múlva menti.
A készülék 3 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.

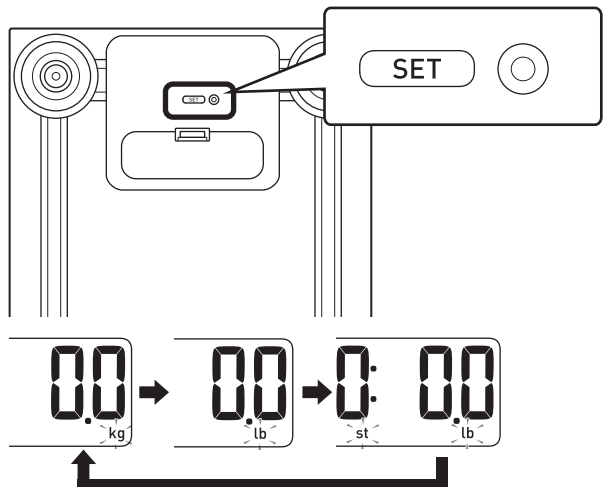

3. A készülék és egy okos eszköz párosítása

A mérési eredmények továbbításához kövesse az alábbi utasításokat. Ez a készülék 2 okos eszközzel párosítható; 2 személy kezelheti a mérési adatait.


1 Engedélyezze a Bluetooth lehetőséget az okos eszközön.

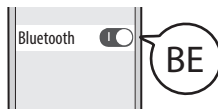

2 Töltse le és telepítse az „OMRON connect” alkalmazást az okos eszközre.



Ha már használta az „OMRON connect” alkalmazást és korábban létrehozott egy felhasználói fiókot, nyissa meg az alkalmazást és adja hozzá az új készüléket.

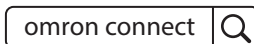


3 Nyissa meg az alkalmazást és kövesse az okos eszköz által megjelenített párosítási utasításokat.

Győződjön meg arról, hogy a készülék az okos eszköz 5 m-es környezetében legyen.




4 Nyomja meg ismét a [Bluetooth] gombot (a mérleg oldalán) és tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig.

A „” és a „P” szimbólum villog a kijelzőn.

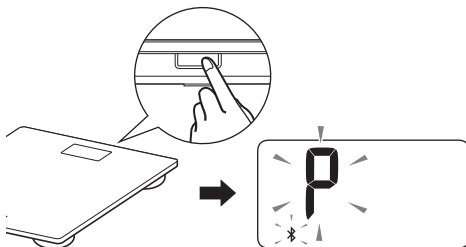


5 Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakozása sikeres volt.

Ha a készüléket sikeresen csatlakoztatta az okos eszközhez, akkor az „” szimbólum villog.



Megjegyzés

- Ha az „” szimbólum jelenik meg, akkor kövesse az alkalmazás utasításait.
- A készülék 10 másodperc után automatikusan kikapcsol.
- Felhívjuk figyelmét, hogy az OMRON nem vállal felelősséget az alkalmazásban tárolt adatok és/vagy információk esetleges elvesztéséből adódó károkért.
- A készülék maximum 2 eszközhöz tartozó párosítási információt tárol.
- A készüléken tárolt adatok megfelelő átviteléhez kizárólag az „OMRON connect” alkalmazást ajánljuk.




Mérés

A következetesség érdekében törekedjen arra, hogy minden nap ugyanabban az időpontban mérje meg a testsúlyát.

1 Helyezze a készüléket kemény, sima és sík padlófelületre.

Megjegyzés


- Ne helyezze a készüléket puha felületre, például szőnyegre vagy padlószőnyegre.

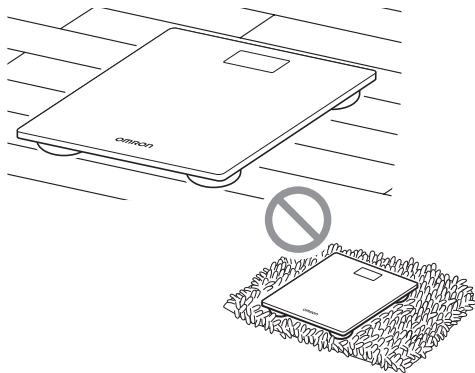

2 Lépjen rá a készülékre amikor az kikapcsolt állapotban van, és végezzen el egy mérést.

A készülék automatikusan bekapcsol és a mérés megkezdődik.

A mérés közben álljon nyugodtan, ne mozogjon.

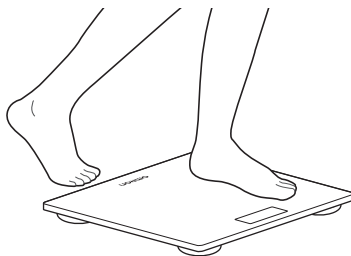

3 A mérés befejezésekor a testsúlyát jelző mérési eredmény villog.



4 Lépjen le a készülékről.

A mérleg 10 másodperc után automatikusan kikapcsol.

Ha továbbítani szeretné a mérési adatokat, akkor tanulmányozza a „A mérési adatok továbbítása” című fejezetet.


A mérési adatok továbbítása

Nyissa meg az alkalmazást az okos eszközön.

1. Automatikus továbbítás


A mérési eredményeket a mérleg kikapcsolása után 30 percen belül automatikusan továbbítja az okos eszközre.

Megjegyzés

- Ha a mérési eredményt a készülék kikapcsolása előtt továbbítja, akkor a „” szimbólum jelenik meg a kijelzőn az átvitel közben.





2. Kézi továbbítás

A mérési eredmények kézi továbbításához nyomja meg a [Bluetooth] gombot a mérleg kikapcsolt állapotában. A „” szimbólum jelenik meg, és lesz látható az átvitel kezdetétől a végéig.



A készülék az adatok átvitelének befejeződését követő 10 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés

- Ha a „” szimbólum nem jelenik meg, akkor a további információkhoz lásd a „Hibaüzenetek és hibaelhárítás” fejezet „Az adatok átvitele nem kezdődik meg.” című részét.
- A készülék maximum 30 mérési eredményt tárol. A tárolt eredmények nem tekinthetők meg a készülék kijelzőjén. Az átvitel után a mérési eredmények az alkalmazásbantekintethetők meg.
- Ha a „” szimbólum jelenik meg, akkor a mérési eredmények nem kerültek továbbításra. Továbbítsa az adatokat, mielőtt a legnégyes értékek törlésre nem kerülnek.

Több felhasználó testsúlyának nyomonkövetése

Ha a készüléket több felhasználó használja, akkor javasolt az alkalmazásban az Autofilter funkció bekapcsolása, amellyel folyamatosan követheti az eredmények változását, és biztosíthatja, hogy az okos eszközén kizárólag az Ön testsúlyának adatai jelenjenek meg. 2 felhasználó testsúlyának nyomon követésére van lehetőség, különböző okos eszközökön.

1 Töltse le és telepítse az okos eszközre az OMRON connect alkalmazást. Lásd: „3. A készülék és egy okos eszköz párosítása”.

2 okos eszköz csatlakoztatható a mérleghez.

2 Nyissa meg az alkalmazást, és regisztrálja a készüléket.

3 Állítsa be az Autofilter (automatikus szűrés) funkciót.

a. Ha először végez mérést, akkor a regisztrációt megerősítő képernyő jelenik meg.

b. Ellenőrizze, hogy a megjelenített érték az Ön testsúlya-e, és regisztrálja.

A további mérési adatokat a következő szinkronizáció során a rendszer a legutóbbi súlyérték alapján fogja szűrni az alkalmazásban, és csak az Ön adatait* jeleníti meg az okos eszközén.


* Ha az Ön súlyértéke nagyon hasonló a másik felhasználóéhoz, akkor előfordulhat, hogy a másik felhasználó súlya kerül kijelzésre. Ebben az esetben törölheti az alkalmazásból az értéket.

Visszatérés az alapértelmezett beállításokhoz


Ha vissza szeretné állítani a készülék beállításait az alapértelmezett értékekre, akkor kövesse az alábbi utasításokat. Ezzel a művelettel a memóriában tárolt összes mérési eredményt és párosítási információt törölni fogja. Győződjön meg róla, hogy a mérleg ki van kapcsolva.


1 Nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 2 másodpercig a [Bluetooth] gombot.

A kijelző a jobb oldalon látható módon villogni.

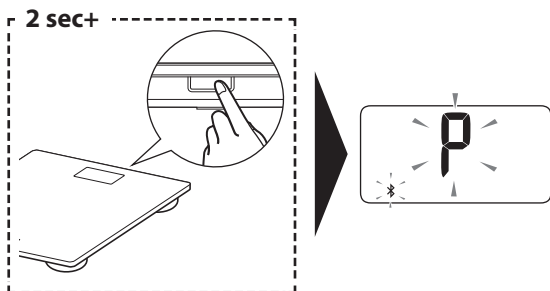

2 Nyomja meg ismét a [Bluetooth] gombot és tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig.

A kijelző a jobb oldalon látható módon villog, és a „” szimbólum villogása megszűnik.

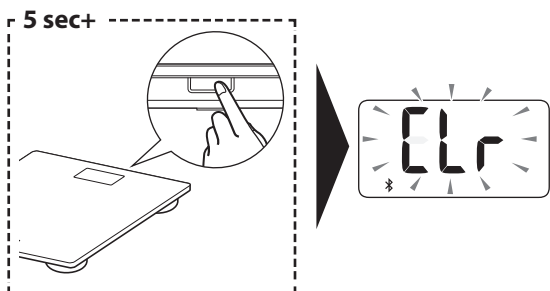


3 Nyomja meg a [SET] gombot.

A kijelző villogásának megszűnésekor az alapértelmezett értékek visszaállítása megtörtént.




Megjegyzés

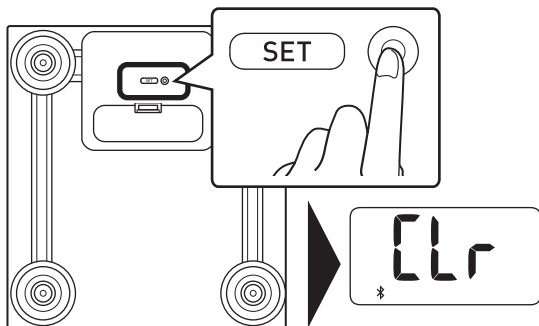- A készülék 10 másodperc után automatikusan kikapcsol.
- Ez a művelet nem törli az alkalmazásban tárolt információkat.



Hibaüzenetek és hibaelhárítás

Ha mérés közben az alább felsorolt problémák bármelyike előfordul, akkor ellenőrizze, hogy nincs-e más elektromos eszköz 30 cm-nél közelebb a készülékhez. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor tanulmányozza az alábbi táblázatot.

Kijelző/probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Err jelenik meg	A készülék nem csatlakozik az okos eszközhöz, vagy nem sikeres az adatátvitel.	Kövesse az alkalmazás által megjelenített utasításokat. Ha az „Err” hibajelzés az alkalmazás ellenőrzése után továbbra is megjelenik, vegye fel a kapcsolatot az OMRON viszonteladóval vagy forgalmazóval.
Err 1 jelenik meg	Mozgott a mérés közben.	Lépjen le a készülékről, ami ezt követően 10 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol. Ezután végezzen el ismét egy mérést.
	A mérést olyan helyiségben végezte, ahol a mérleg erős mágneses hatásnak van kitéve.	Végezzen egy újabb mérést egy másik helyiségben.
Err2/Err5 jelenik meg	Készülékhiba lépett fel.	Vegye fel a kapcsolatot az OMRON üzlettel vagy a forgalmazóval.
Err3 jelenik meg	A testsúlyja kívül esik a mérhető tartományon.	
Err4 jelenik meg	Hibás beállítás az automatikus kalibráció során.	Végezzen el ismét egy mérést.
 jelenik meg	A mérési eredmény nem került továbbításra.	Továbbítsa a mérési eredményeket az alkalmazásba. További információkért lásd a „A mérési adatok továbbítása” című fejezetet. A szimbólum eltűnik, miután a készülék a mérési adatokat sikeresen továbbította.
 villog	Az elemek töltöttsége alacsony.	Az összes elem egyszerre történő cseréje javasolt. Lásd az „1. Az elemek behelyezése” fejezetet.
 , Al jelenik meg	Az elemek lemerültek.	Azonnal cserélje újakra az összes elemet. Lásd az „1. Az elemek behelyezése” fejezetet.
A készülékre történő rálépéskor a mérleg nem kapcsol be.	Az elemek polaritása nem megfelelő.	Ellenőrizze az elemek megfelelő elhelyezését. Lásd az „1. Az elemek behelyezése” fejezetet.
	A felhasználó testsúlya kevesebb, mint 10 kg.	A készülék automatikus bekapcsolásához legalább 10 kg terhelésre van szükség. Ha a felhasználó testsúlya 10 kg értéknél kevesebb, akkor helyezzen egy 10 kg-os, vagy annál nehezebb tárgyat a mérlegre a bekapcsoláshoz, majd folytassa a mérés folyamatát.
Az adatok átvitele nem kezdődik meg.	Csatlakozási hiba.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy nincs-e interferenciaforrás a közelben. Helyezze a vevő eszközt a készülék 5 m-es környezetébe. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor további információért és segítségért lásd az „OMRON connect” alkalmazás „Súgó” részét.
A mérés eredménye magasabb vagy alacsonyabb az aktuális értéknél. A mérési eredmények jelentősen eltérhetnek egymástól az egyes mérések során.	Szönyegen, padlószőnyegen vagy egyenetlen felületen végzi a mérést.	Győződjön meg arról, hogy a készülék kemény, sík, és vízszintes felületre legyen helyezve.
	A készülék automatikus kalibrációjának folyamatát nem sikerült befejezni.	Végezze el a készülék kalibrációját. Lásd a „Kalibrálás” fejezetet.

Karbantartás


Karbantartás

A következőkre figyeljen oda, hogy megvédje a készüléket a károsodástól:


- A készüléket egy puha, száraz ruhával, vagy egy puha, benedvesített ruhával és enyhe (semleges) mosószert használva tisztítsa meg.
- Puha, nedves ruhával és háztartási alkohollal tisztítsa meg a mérleglap felületét.
- A készüléket tiszta, biztonságos helyen tárolja.
- Ne használjon súroló anyagokat vagy illékony vegyszereket, így például benzint, hígítót vagy más hasonló oldószert a készülék tisztításához.
- Ne merítse vízbe a készüléket.

Helyes tárolás


Használaton kívül a készülék automatikusan újralibrálja magát. Ha az automatikus kalibrálás nem működik, akkor a készülék kézi kalibrálásának elvégzésével kapcsolatos útmutatásért lásd a „Kalibrálás” című részt. Az automatikus kalibrálás elvégzésének biztosításához ne tárolja a készüléket az alábbi ábrákon látható körülmények között:

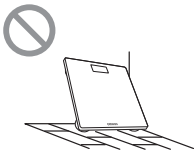

A készülék hozzáér a falhoz vagy egyéb objektumokhoz

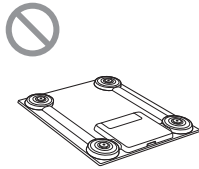

A készülék a felső részével lefelé lett elhelyezve

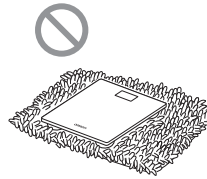

A készülék a szőnyegen vagy matracon van



Valamilyen objektum van a készüléken

Kalibrálás

A készülék kalibrációjához kövesse az alábbi lépéseket.

1 Helyezze a készüléket kemény, sima és sík padlófelületre.

2 Nyomja meg a készülék felületét a kezével a mérleg bekapcsolásához.

Ezt követően azonnal vegye el a kezét a készülékről.

3 Ha „0,0 kg” (vagy „0,0 lb”, „0,0 st”) látható a kijelzőn, akkor várjon 1 percet a mérleg kikapcsolásához.

Ezután elvégezheti a kívánt méréseket.

Specifikációk

Termékleírás	Okos testösszetétel-elemző mérőkészülék
Modell (kód)	HN300T2 Intelli IT (HN-300T2-EBK / HN-300T2-EGY)
Kijelző	5 – 150 kg, 0,1 kg-os léptékkal (11 – 330 font, 0,2 fontos léptékkal) (0 stone 11 font – 23 stone 8 font, 0,2 fontos léptékkal)
Testsúlymérési pontosság	5 és 150 kg között $\pm(1\%+0,1\text{ kg})$ (11 és 330 font között $\pm(1\%+0,2\text{ font})$) (0 kő (stone=angolszász mértékegység) 11 font és 23 kő (stone=angolszász mértékegység) 8 font között $\pm(1\%+0,2\text{ font})$)
Átviteli mód	Bluetooth® Low Energy (alacsony energiafelhasználású technológia)
Vezeték nélküli kommunikáció	Frekvenciatartomány: 2,4 GHz (2400 - 2483,5 MHz) Moduláció: GFSK Adásteljesítmény: <20 dBm
Aramellátás	4 „AAA” elem
Az elem élettartama	Körülbelül 3 hónap: mangán elemek használata esetén Körülbelül 6 hónap: alkáli elemek használata esetén (Minden elemtípus esetén naponta 2 mérés és 2 adatátvitel, 23 °C-os szobahőmérsékleten)
Működési körülmények	+5 és +40 °C között, 30 és 85 % relatív páratartalom között (páraleszapódás nélkül), 860 és 1060 hPa nyomás között
Tárolási feltételek	-20 és +60 °C között, 10 és 95 % relatív páratartalom között (páraleszapódás nélkül)
Súly	Körülbelül 1,5 kg, elemekkel együtt
Külső méretek	Körülbelül 270 mm (szélesség) × 26,4 mm (magasság) × 290 mm (mélység)
Tartalom	Okos testösszetétel-elemző mérőkészülék, 4 db „AAA” mangán elem, használati útmutató, alkalmazás használati adatlap, garanciajegy

Megjegyzés

- A specifikációk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.
- A termék gyártási dátuma a készülékre nyomtatva látható: az első 4 számjegy jelenti a gyártás évét, a következő 2 számjegy a gyártás hónapját, az utolsó 2 számjegy pedig a gyártás napját.

A vezeték nélküli kommunikációs interferenciáról

A termékben található Bluetooth opcióra használhatja, hogy a mobil eszközök dedikált alkalmazásaihoz csatlakozva a terméken automatikusan elvégezze a dátum/idő beállításokat, és a termékről a mobil eszközre szinkronizálhassa a mérési adatokat. A mobil eszközön található adatok további kezelése a felhasználó belátása szerint történik. Ez a termék az engedély nélküli ISM frekvenciasávban működik, abban a 2,4 GHz-es tartományban, amelyben bármilyen harmadik fél szándékosan vagy véletlenül lehallgathatja, és ismeretlen célra felhasználhatja a továbbított információkat. Ha a terméket ebben a vezeték nélküli rádióhullám-sávban működő eszközök, például mikrohullámú sütő, vezeték nélküli LAN berendezések közelében használja, akkor elképzelhető, hogy interferencia lép fel. Ha interferencia lép fel, állítsa le a zavart okozó egyéb készülékek használatát, vagy vigye távolabb a terméket a többi vezeték nélküli eszköztől a használat előtt.

A készülék megfelelő elhelyezése (Elektromos és elektronikai eszközök hulladékkezelése)

A készüléken és a dokumentációban található ábra azt jelzi, hogy a berendezés az élettartama végén nem háztartási hulladékként kezelendő.

A szabályozatlan hulladékkezelés elleni törekvések részeként a környezet és az egészség védelme érdekében a terméket élettartama végén az egyéb hulladéktípusoktól elkülönítve kell kezelni, és gondoskodni kell alkotóelemeinek megfelelő újrahasznosításáról.

A berendezés használatát kívüli elemeinek újrahasznosításával és elhelyezésével kapcsolatban a háztartáson belüli felhasználók a viszonteladóval (ahol a berendezést vásárolták), vagy a helyi önkormányzati hivattal vegyék fel a kapcsolatot.

Üzleti felhasználók forduljanak viszonteladójukhoz, és a termék vásárlásakor kötött szerződés feltételeinek megfelelően járjanak el. A termék nem kezelhető együtt egyéb kereskedelmi hulladékkal.



Útmutató és gyártói nyilatkozat

- Az OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a HN-300T2-EBK és HN-300T2-EGY típusú rádióhullámot sugárzó berendezés megfelel a 2014/53/EK irányelv előírásainak.
- Az EK területén érvényes megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el: www.omron-healthcare.com
- Ezt az OMRON terméket az OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japán székhelyű vállalat szigorú minőségbiztosítási rendszerét követve gyártották.



Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. regisztrált védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban valamint régiókban. Az App Store az Apple Inc. egy szolgáltatásának márkanéve.

A Google Play és a Google Play logó a Google LLC védjegyei.

A **Bluetooth®** szó és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és az OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. licenc alatt használja. A dokumentumban használt minden más védjeggyel és márkanévvel a megfelelő tulajdonos rendelkezik.

Gyártó	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPÁN	
EU-képviselő	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLANDIA www.omron-healthcare.com	
Termékképviselő	KRELL PRECISION (YANGZHOU) CO., LTD. No. 28, Xingyang Road, Economic Development Zone, Yangzhou, Jiangsu 225009, Kína	
Leányvállalatok	Importőr az Egyesült Királyságban	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH / OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors	

Származási ország: Kína

<https://www.omron-healthcare.com/>