

**Kompressorisumutin
C28P
(NE-C105-E)
Käyttöohje**

IM-NE-C105-E-FI-01-04/2020
Julkaisupäivä: 2020-09-28

Sisältö

Käyttökohde	3
Sumutinpakkauksen toiminta	4
Sumutinpakkaus ja Advanced Valve Technology (AVT)	5
Yksikön osat.....	6
Tärkeitä turvallisuusohjeita.....	7
Käyttö	8
Puhdistus ja päivittäinen desinfiointi	12
Ilmansuodattimen vaihtaminen	13
Tekniset tiedot	14
Vianetsintä.....	17
Takuu.....	18
Valinnaiset lääkinälliset lisävarusteet	19
Muut valinnaiset osat / vaihto-osat.....	19

Kiitämme OMRON C28P -sumuttimen ostamisesta.

Tämä tuote on kehitetty yhdessä hengitysterauttien kanssa astman, keuhkohtaumataudin (COPD), kroonisen keuhkoputkentulehduksen, allergioiden ja muiden hengitysvaikeuksien onnistuneeseen hoitoon. Tämä on lääkintälaitte. Käytä laitetta täsmälleen niin kuin lääkäri ja/tai hengitysterauttisi sinua ohjaa.

Käyttökohde

Lääketieteellinen tarkoitus:

Tuote on tarkoitettu lääkkeiden hengittämiseen hengitysvaikeuksissa.

Kohdekäyttäjä:

- Licensioitu lääketieteen asiantuntija, kuten lääkäri, hoitaja tai terapeutti, tai näiden valvoma lääkintähenkilöstö tai potilas.
- Käyttäjän on myös ymmärrettävä C28P-sumuttimen perustoiminnot ja tämän ohjekirjan sisältö.

Kohdepotilaat:

Hengitysvaikeuksista kärsivät potilaat, jotka tarvitsevat sisäänhengitettäviä lääkeaineita.

Ympäristö:

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi lääketieteellisissä tiloissa, kuten sairaalassa, klinikalla ja lääkärin vastaanotolla, sekä normaalissa kotiympäristössä.

Käyttöikä:

Kestoajat ovat seuraavat, jos tuotteella sumutetaan huoneenlämmössä (23 °C) kolme kertaa päivässä 10 minuutin ajan kerrallaan.


Kesto aika saattaa vaihdella riippuen käyttöympäristöstä.

Kompressor (pääyksikkö):	7,5 vuotta
Virtajohto:	7,5 vuotta
Sumutinpakkaus / suukappale / lapsen maski / aikuisen maski / ilmaletku / sovitin:	1 vuosi
Ilmansuodatin:	60 päivää

Tuotteen usein toistuva käyttö saattaa lyhentää sen käyttöikää.

Sumutinpakkauksen toiminta

Lääkekanavaa pitkin pumpattu lääke sekoittuu kompressorin pumpun tuottamaan paineilmaan. Lääkkeen ja paineilman yhdistelmä muutetaan hienoiksi hiukkasiksi, joita sumutetaan läppää kosketettaessa.

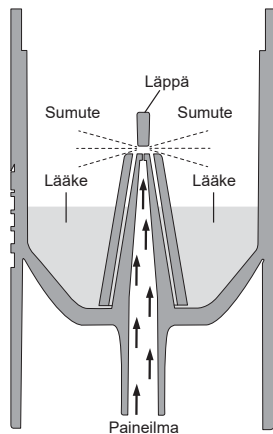

Sumutinpakkaus ja Advanced Valve Technology (AVT)

C28P-sumutin on varustettu hengitysventtiilijärjestelmällä, jonka avulla potilas pystyy hengittämään maksimaalisen määrän lääkettä. Se optimoi lääkevirtauksen sisäänhengityksen aikana ja vähentää lääkkeen menetystä uloshengityksen aikana.

Kun aerosolin virtaus synkronoidaan hengityksen kanssa, inhaloitavan lääkkeen hoidollinen vaikutus on optimaalinen.


Huomaa: Vain suukappaleen käyttäminen mahdollistaa sumuttimen synkronoidun toiminnan!

Sisäänhengitysvaihe

Sisäänhengityksen aikana sisäänhengitysventtiili (A) avautuu ja ilma siirtyy sumuttimeen.

Ilma sekoittuu syntyvään sumutteeseen (B) ja potilas hengittää sen sisään suukappaleen kautta (C).


Tässä vaiheessa uloshengitysventtiili (D) pysyy suljettuna, mikä estää sumutteen tuhlauksen.

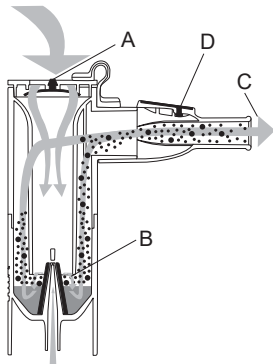

Uloshengitysvaihe

Kun suukappaleen läpi hengitetään ulos, sumuttimen sisäänhengitysventtiili (A) sulkeutuu, mikä estää sumutteen poistumisen sumuttimesta. Muodostunut sumute pysyy sumuttimessa ja on käytettävissä seuraavassa sisäänhengitysvaiheessa.

Ulos hengitettävä ilma poistuu suukappaleesta uloshengitysventtiilin (D) läpi.

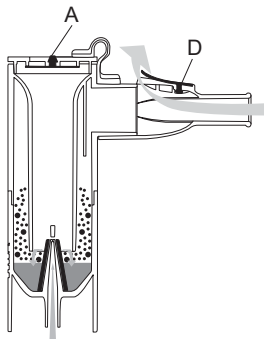


Yksikön osat

Kompressor (pääyksikkö)


Näkymä takaa



Sumutinpakkaus

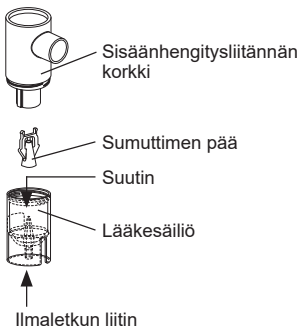

Suokappalesarja

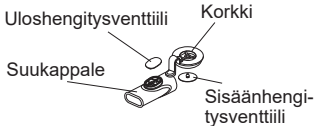

Aikuisen maski (PP+TPE) sisältää kuminauhan



Tukisovitin lapsen maskia varten (PP)



Lapsen maski (PP+TPE) sisältää kuminauhan



Ilmaletku (PVC, 150 cm)



Käyttöohje

Kantolaukku

Vaihtoilmansuodattimet x 5

Tärkeitä turvallisuusohjeita

 Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Varoitus:

1. Käytä laitetta vain inhalaattorina hoitotarkoituksiin. Kaikki muunlainen käyttö on virheellistä ja voi olla vaarallista. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä.
2. Älä käytä laitetta anestesia- tai hengityskoneen hengitysletkustossa.
3. Irrota virtapistoke aina käytön jälkeen.
4. Älä peitä tuuletusreikiä käytön aikana. Kompressori voi kuumeta, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa palovamman.
5. Kompressori ja virtapistoke eivät ole vedenpitäviä. Älä kaada vettä tai muita nesteitä näiden osien päälle. Jos nestettä kaatuu näiden osien päälle, irrota virtapistoke välittömästi ja pyyhi neste pois.
6. Älä yritä korjata laitetta. Katso kohta "Vianetsintä".
7. Pidä laite loitolla valvomattomista vauvoista ja lapsista. Laitteessa saattaa olla pieniä osia, jotka lapsi voi nielaista.
8. Valvo laitteen käyttöä tarkasti, jos sitä käytetään lasten tai vajaakykyisten henkilöiden hoitoon tai heidän läheisyydessään.
9. Noudata lääkärin tai hengitysterapeutin antamia ohjeita lääkkeen tyypistä, annoksesta ja ottoajoista.
10. Tuotetta ei saa käyttää potilaille, jotka ovat tajuttomia tai eivät hengitä spontaanisti.
11. Kun hoito on suoritettu, irrota ilmaletku sumuttimesta ja kompressorista.
12. Virtajohto ja ilmaletku voivat aiheuttaa pituutensa vuoksi kuristumisvaaran.
13. Käytä kompressoria paikassa, jossa pistorasia on helposti saatavilla hoidon aikana.
14. Jos huomaat allergisia oireita tai muita vaikeuksia laitetta käyttäessäsi, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.
15. Varmista, että laitteen käytön aikana 30 cm:n etäisyydellä laitteesta ei ole matkapuhelinta tai mitään muuta sähkömagneettista kenttää aiheuttavaa sähkölaitetta, sillä tämä voi heikentää laitteen toimintaa.
16. Älä käytä yrttiöljyjä, -keitteitä tai -uutteita hengittämiseen kompressorisumuttimella.

Käyttö


1. Varmista, että virtapainike on OFF-asennossa.
(Virran merkkivalo ei pala.)
2. Työnnä virtajohto kompressorin liitintään ja kytke virtapistoke pistorasiaan.
Huomaa: Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa virtajohto on vaikea irrottaa tarvittaessa.

3. Poista lääkesäiliön sisäänhengitysliitännän korkki.

- 1) Kierrä sisäänhengitysliitännän korkkia vastapäivään.
- 2) Nosta sisäänhengitysliitännän korkki ulos lääkesäiliöstä.



4. Varmista, että sumuttimen pää on kiinnitetty sisäänhengitysliitännän korkkiin.

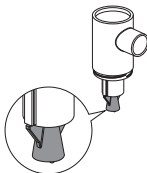


5. Lisää oikea määrä määrättyä lääkettä lääkesäiliöön. Muista noudattaa vähimmäis- ja enimmäistäyttömääriä koskevia ohjeita (katso tekniset tiedot). Jos sumutinpakkaus sisältää liian vähän tai liian paljon lääkettä, sumutus ja siten myös hoito heikkenee merkittävästi.



6. Aseta sisäänhengityslitännän korkki takaisin lääkesäiliöön.

- 1) Aseta sisäänhengityslitännän korkki lääkesäiliöön.
- 2) Kierrä sisäänhengityslitännän korkkia myötäpäivään.

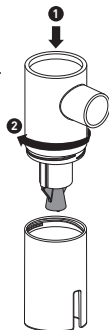


Suokappaleen käyttö

7a. Koko suokappale.


Varmista, että venttiilit on kiinnitetty oikein.

Katso tätä piirustusta.

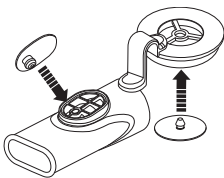

7b. Kiinnitä suokappale sumutinpakkaukseen ja paina sen korkki sisäänhengityslitännän korkkiin.

7c. Pidä suokappale suussa sekä sisään- että uloshengityksen aikana, jotta saat täyden hyödyn venttiilijärjestelmästä.

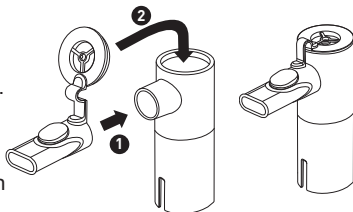


FI

Huomaa: Imeväisillä tai potilailla, joilla on erityistarpeita, tulee käyttää maskia suokappaleen sijaan. Kun käytät maskia, varmista, että korkki on irrotettu sisäänhengityslitännän korkista.


⚠ Huomio:

Jotta suokappale voidaan irrottaa sumutinpakkauksesta, on tärkeää irrottaa korkki ensin sisäänhengityslitännän korkista ja vetää se sitten ulos. **Älä tee käänteisesti!**

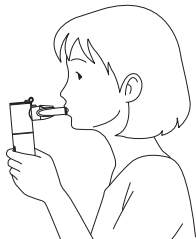


Aikuisen maskin käyttö

7d. Liitä aikuisen maski sumutinpakkaukseen.

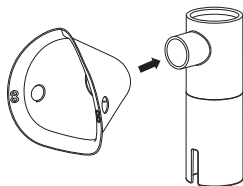


Lapsi maskin ja sovittimen käyttö

7e. Liitä lapsi maskin tukisovittimeen ja liitä se sumutinpakkaukseen.

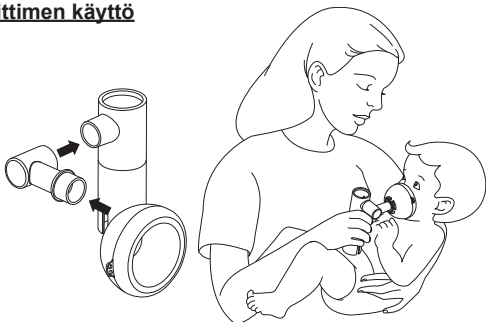

8. Ilmaletkun kiinnitys.
Kiertäessäsi ilmaletkun liitintä hiukan paina se lujasti kompressorissa olevaan ilmaletkun liittimeen.

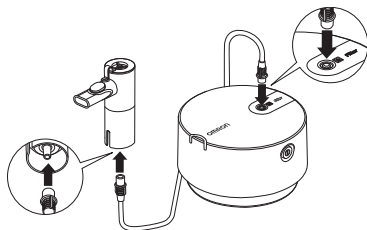

9. Pidä sumutinpakkausta oikealla olevan kuvan mukaisesti.
Noudata lääkärin tai hengitysterapeutin antamia ohjeita.



⚠ Huomio:

Älä kallista sumutinpakkausta yli 30 asteen kulmaan mihinkään suuntaan.
Lääkettä voi virrata suuhun tai sumutus voi olla tehotonta.

- 10.** Kytke kompressorin virta painamalla virtapainiketta. Sininen virran merkkivalo syttyy. Kun kompressori käynnistyy, sumutus alkaa ja sumutetta muodostuu. Hengitä lääkettä kevyesti sisään. Hengitä ulos suukappaleen läpi.

- 11.** Hoidon loputtua sammuta laite painamalla virtapainiketta uudelleen. Irrota sitten kompressori pistorasiasta.

Puhdistus ja päivittäinen desinfiointi

Noudata alla olevia ohjeita, kun puhdistat tai desinfiointi osia. Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaurioihin, tehottomaan sumutukseen tai infektiin.

Pese kätesi huolellisesti ennen sumuttimen osien puhdistamista ja desinfiointia.

Puhdista ja desinfiointi sumutinpakkauksen ja sen osat ja lisävarusteet (maskit, suukappale ja sovitin) ennen niiden käyttöä seuraavasti:

- ennen ensimmäistä käyttökertaa (puhdistus ja desinfiointi)
- jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan (puhdistus ja desinfiointi)
- jos toinen henkilö käyttää samaa laitetta (puhdistus ja desinfiointi)
- jokaisen käyttökerran jälkeen (puhdistus)
- päivän viimeisen käyttökerran jälkeen (puhdistus ja desinfiointi)

● **Sumutinpakkauksen, maskien, suukappaleen (mukaan lukien kaikki osat) ja sovittimen puhdistaminen:**

Pura sumutinpakkauksen kokonaan. Irrota venttiilit suukappaleesta.

Pese osat lämpimässä vedessä miedolla, neutraalilla pesuaineella.

Huuhtelee ne perusteellisesti puhtaalla kuumalla vesijohtovedellä,

poista ylimääräinen vesi kopauttamalla kevyesti ja anna kuivua

puhtaassa paikassa. Suosittelemme vaihtamaan sumutinpakkauksen ja suukappaleen 100–120 käyttökerran tai noin 20 keittämisen jälkeen.

● **Kompressorin puhdistaminen:**

Varmista ensin, että virtapistoke on irrotettu pistorasiasta.

Pyyhi puhtaaksi pehmeällä liinalla, joka on kostutettu vedellä tai miedolla, neutraalilla pesuaineella.

● **Kosteuden poistaminen ilmaletkusta:**

Jos ilmaputkeen jää kosteutta, toimi alla kuvatulla tavalla.

Varmista, että ilmaletku on kiinnitetty kompressoriin. Irrota ilmaletku sumutinpakkauksesta. Kytke kompressori päälle ja kuivaa ilmaletku päästämällä ilmaa sen läpi.

- **Sumutinpakkauksen, maskien, suukappaleen (mukaan lukien kaikki osat) ja sovittimen desinfiointi:**

Jos osat ovat värjäytyneet voimakkaasti, vaihda ne uusiin.

Sumutinpakkkaus, maski, suukappale (mukaan lukien kaikki osat) ja sovitin voidaan desinfioida kemiallisella desinfiointiaineella, kuten etanolilla tai natriumhypokloriitilla (Milton) tuotteen käyttöohjeiden mukaisesti. Huuhtelee aine lopuksi pois puhtaalla lämpimällä vedellä. Anna niiden sitten kuivua.

Huomaa: Älä puhdista laitetta bentseenillä, ohentimella tai syttyvällä kemikaalilla. (Ei-lateksisia) kuminauhoja ei voi desinfioida. Poista ne ennen maskien desinfiointia.

- **Keittäminen:**

Sumutinpakkkaus, suukappale (mukaan lukien kaikki osat), maskit ja sovitin voidaan desinfioida myös keittämällä niitä 15–20 minuutin ajan runsaassa vedessä. Poista osat varovasti keittämisen jälkeen, ravistele liika vesi pois ja anna osien kuivua puhtaassa paikassa.

Huomaa: Älä keitä ilmaletkua.

Ilmansuodattimen vaihtaminen

Jos ilmansuodattimen väri on muuttunut tai sitä on käytetty kauemmin kuin 60 päivää, vaihda se uuteen. Suodattimien ostaminen – Katso kohtaa Muut valinnaiset osat / vaihto-osat.


Irrota ilmansuodattimen kansi tasakärkisellä ruuvitaltalla kuvan mukaisesti. Poista suodatin ja asenna uusi suodatin kuvan mukaisesti.

Pane ilmansuodattimen kansi takaisin paikalleen.


Huomaa: Älä pese tai puhdista ilmansuodatinta.

Jos ilmansuodatin kostuu, vaihda se.

Kosteat ilmansuodattimet voivat aiheuttaa tukoksia.

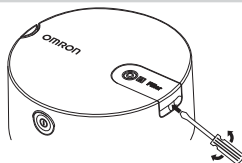

FI

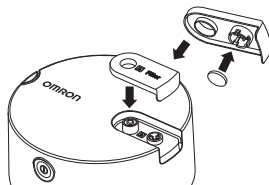


Tekniset tiedot

Tuoteluokka:	Aerosolihoitolaite
Tuotteen kuvaus:	Kompressorisumutin
Malli (koodi):	C28P (NE-C105-E)
Nimellisarvot:	230 V ~50 Hz
Tehonkulutus:	140 VA
Käyttötila:	Jatkuva käyttö
Käyttölämpötila/-kosteus/ -ilmanpaine:	+5...+40 °C / 15–85 %:n suhteellinen kosteus / 700–1 060 hPa
Lämpötila, kosteus ja ilmanpaine säilytyksen ja kuljetuksen aikana:	-20...+60 °C / 5–95 %:n suhteellinen kosteus / 500–1 060 hPa
Luokitukset:	Tyyppi BF (potilasliityntäosa): Suukappale ja maskit Luokka II (suojaus sähköiskua vastaan)
IP-luokka:	IP21
Kompressorin paino:	Noin 1,3 kg (vain kompressori)
Kompressorin mitat:	Noin Ø 180 x 104 (k) mm
Sisältö:	Kompressori, virtajohto ja EU-pistoke, sumutinpakkaus, ilmaletku (150 cm), suukappalesarja, sovitin, aikuisen maski, lapsen maski, kantolaukku, 5 kpl varailmansuodattimia, käyttöohje
Oikeat lääkemäärät:	Vähintään 2 ml – enintään 10 ml
Lääkkeen jäännöstilavuus:	Noin 0,7 ml
Ääni: Melutaso (1 m:n etäisyydellä)	Noin 55 dB
Hiukkaskoko (MMAD):	Noin 2,65 µm

Sumutteen määrä Noin 0,7 ml
(2 ml, 1 % NaF):





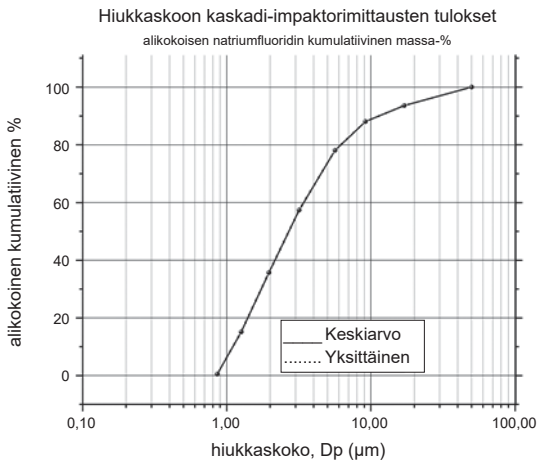








Sumutteen ulostulonopeus Noin 0,12 ml/min
(2 ml, 1 % NaF):

MMAD = massan aerodynaamisen halkaisijan mediaani



FI

CE 0051

Symbolien kuvaus			
	Käyttäjän pitää lukea käyttöohjeet.		Kosteusrajoitus
	Soveltuva osa – tyyppi BF suojausaste sähköiskua vastaan (vuotovirta)		Ilmanpainerajoitus
	Luokka II Suoja sähköiskuja vastaan		Lämpötilarajoitus
IP XX	Koteloinnin suojausaste IEC 60529 -standardin mukaisesti		Käynnistys/pysäytys (paina-paina)
	CE-merkintä		Vaihtovirta
	Eränumero		Lääkintälaite
	Sarjanumero		Valmistuspäivämäärä

Yleisiä huomautuksia:

- IP-luokitus ilmoittaa suojan, joka annetaan IEC 60529 -standardin mukaisesti. Kompressorin on suojattu vierailta esineiltä, joiden halkaisija on 12 mm tai sitä suurempi (kuten sormet), ja pystysuoraan putoavilta vesipisaroilta, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia tavallisen käytön aikana.
- Tekniset tiedot saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.
- Laite ei ehkä toimi, jos lämpötila ja jännite poikkeavat teknisissä tiedoissa annetuista määrittelyistä.
- Suorituskyky saattaa vaihdella lääkkeiden mukaan, esim. suspensiot tai suuriviskositeettiset lääkkeet. Katso lisätietoja lääketoimittajan käyttötiedotteesta.

Vianetsintä

Jos käytön aikana esiintyy jokin seuraavista ongelmista, tarkista ensin, että 30 cm:n etäisyydellä ei ole muita sähkölaitteita. Jos ongelma ei korjaudu, katso lisätietoja seuraavasta taulukosta.

Laite ei kytkeydy päälle

- Tarkista, että virtapistoke on asetettu oikein pistorasiaan ja että virtajohto on kytketty kompressorin liitäntään.
- Varmista, että virtapainike on päällä-asennossa.

Laite kytkeytyy päälle mutta ei sumuta

- Varmista, että sumuttimen pää on kiinnitetty kunnolla sumutinpakkauksen sisäänhengityslitännän korkkiin.
- Varmista, että ilmaletku ei ole puristunut tai vääntynyt.
- Tarkista, onko ilmansuodattimessa tukkeutumia tai likaa. Vaihda se tarvittaessa.
- Tarkista, että sumutinpakkauksessa on riittävästi lääkettä.

Laite lakkaa yhtäkkiä toimimasta käytön aikana.

- Lämpökatkaisin katkaisi laitteesta virran jommastakummasta seuraavasta syystä:
 - laitetta käytettiin ympäristössä, jossa lämpötila oli yli 40 °C
 - tuuletusreiät oli peitetty.

Älä yritä korjata laitetta. Älä avaa ja/tai muuntele laitetta. Käyttäjä ei voi huoltaa laitteen osia. Palauta laite valtuutettuun OMRON-liikkeeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle.

Ilmoita kaikista tähän laitteeseen liittyvistä vakavista tapahtumista valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa sijaitset.

Takuu

Kiitos OMRON-tuotteen ostamisesta. Tämä tuote on valmistettu laadukkaista materiaaleista erittäin huolellisesti. Tuote toimii asianmukaisesti, jos sitä käytetään ja ylläpidetään käyttöohjeessa mainitulla tavalla. OMRON takaa tämän tuotteen kolmeksi (3) vuodeksi ostopäivästä alkaen. OMRON takaa, että tuote on valmistettu oikein ja että työn laatu ja materiaalit ovat asianmukaisia. Takuuaikana OMRON korjaa tai korvaa viallisen tuotteen tai vialliset osat eikä veloita työstä tai varaosista. Takuu ei kata

- a. kuljetuskustannuksia ja -riskejä
- b. valtuuttamattomien henkilöiden tekemien korjauksien aiheuttamien korjausten ja/tai vaurioiden kustannuksia.
- c. säännöllistä tarkastusta ja huoltoa
- d. muiden valinnaisten varusteiden tai osien kuin pääyksikön toimintavirhettä tai kulumista, ellei edellä nimenomaisesti toisin määrätä
- e. vaateen hylkäämisestä aiheutuvia kustannuksia (niistä veloitetaan)
- f. mitään vahinkoja, mukaan lukien henkilövahinkoja, jotka aiheutuvat onnettomuudesta tai väärinkäytöstä.

Jos tarvitset takuupalvelua, ota yhteys tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai valtuutettuun OMRON-jälleenmyyjään. Osoite on tuotepakkauksessa/-tiedoissa, tai sitä voi tiedustella tuotteisiin erikoistuneelta vähittäisliikkeeltä.

Takuun alainen korjaus tai vaihto ei pidennä takuuta eikä uudista takuukautta.

Takuu on voimassa vain, jos koko tuote ja alkuperäinen vähittäisliikkeestä saatu lasku/kuitti palautetaan. OMRON pidättää oikeuden evätä takuupalvelu, jos sille on annettu epäselviä tietoja.

Valinnaiset lääkinälliset lisävarusteet

Tuotteen kuvaus	Malli
Sumutinpakkaus	NEB6026
Ilmaletku	NEB6016
Suukappalesarja (Sisältö: Suukappale, jossa on korkki, ulohengitysventtiili, sisäänhengitysventtiili)	NEB6027
Lapsen maski (sisältää kuminauhan)	NEB6028
Aikuisen maski (sisältää kuminauhan)	NEB6029
Tukisovitin lapsen maskia varten	NEB6030
Nenähuuhtelulaite	NEB6014

Muut valinnaiset osat / vaihto-osat

Tuotteen kuvaus	Malli
Virtajohto ja EU-pistoke	3AC459
Virtajohto ja UK-pistoke	3AC460
Ilmansuodatinsarja (sisältö: 5 kpl)	3AC458

FI

Tärkeitä tietoja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC)


Tämä 3A HEALTH CARE S.r.l.:n valmistama laite on sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan EN60601-1-2:2015 -standardin mukainen.

Muita EMC-standardin mukaisia asiakirjoja on saatavissa OMRON Healthcare Europe:ltä tässä käyttöohjeessa mainitusta osoitteesta tai verkkosivuilta www.omron-healthcare.com.



HÄVITTÄMISMENETELMÄ (Direktiivi 2012/19/EU-WEEE)

Tätä tuotetta ei saa käsitellä tavanomaisena kotitalousjätteenä, vaan se pitää palauttaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätyspisteeseen. Lisätietoja on saatavilla paikkakuntasi jätehuoltopalveluista, tai laitteen myyneeltä jälleenmyyjältä.

Valmistaja 	3A HEALTH CARE S.r.l. Via Marziale Cerutti, 90F/G 25017 Lonato del Garda (BS), Italia	
Jälleenmyyjä	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, ALANKOMAAT www.omron-healthcare.com	
Tytäryhtiöt	Maahantuoja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vastuhenkilö Yhdistyneessä kuningaskunnassa	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com
		OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH / OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors

Valmistettu Italiassa